


GoVision Pro

Vidéo Agrandisseur Vocalisé



Manuel d'utilisation V1.0

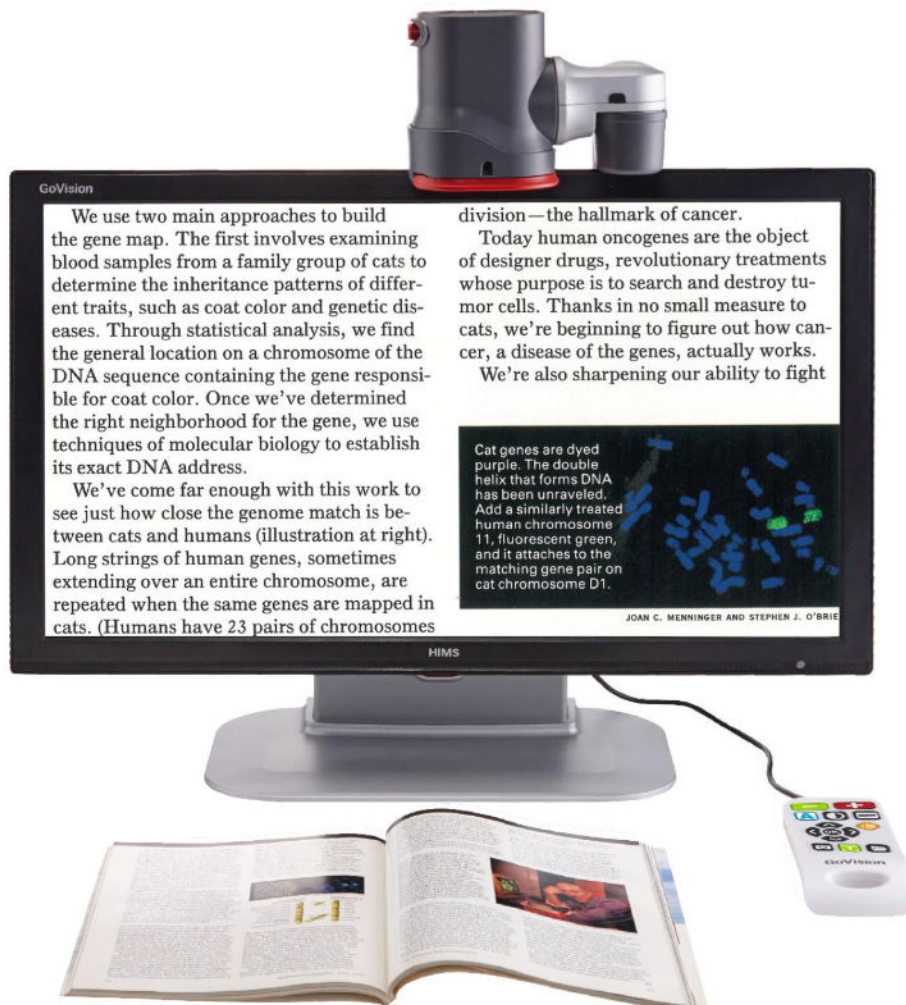

01 69 19 14 60

Introduction

Ce manuel décrit les caractéristiques et les fonctions du GoVision Pro.

Assurez-vous de lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit, et de le garder dans un endroit pratique pour faciliter la consultation.

Ce guide de l'utilisateur comprend des informations de garantie du produit ainsi que des informations sur la façon de mettre en place GoVision Pro et utiliser ses fonctions de base.

Le contenu de ce manuel et les spécifications du produit sont sujettes à modification sans préavis.

Copyright

Les produits HIMS GoVision Pro et la propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur de documentation, sont protégés par les lois de copyright et ne peuvent être utilisés sans autorisation expresse de SELVAS / HIMS.

Ce guide de démarrage rapide ne peut pas être reproduit, en tout ou en partie, sans le consentement de VISIOLE ou de HIMS.

Sécurité

Pour assurer votre sécurité personnelle et la bonne utilisation du produit ainsi que pour prévenir les dommages accidentels, respecter les consignes de sécurité suivantes.

Avertissement pour votre sécurité

Ne pas suivre les précautions ci-dessous peut causer des blessures graves ou la mort.

- Veuillez garder le GoVision PRO à l'abri des températures extrêmes ou des conditions humides. N'utilisez pas le GoVision PRO dans des environnements dont la température est supérieure à 40 degrés Celsius (104 degrés Fahrenheit) ou inférieure à 10 degrés Celsius (50 degrés Fahrenheit).
- Ne pas brancher de multiples appareils électriques dans la même prise que GoVision Pro.
- Ne pas plier ou tirer sur le cordon pour déplacer l'unité.
- Utilisez uniquement l'alimentation fournie avec le produit par le fabricant, ou une alimentation répondant aux spécifications électriques fournis par la société.
- Garder GoVision Pro loin des objets et substances inflammables.
- Si la fiche de l'adaptateur fourni n'est pas correcte, contactez notre service après vente.

Précautions de sécurité

Le non-respect des instructions ci dessous peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

Ne pas tenter de démonter ou de réparer le produit vous-même. Seuls les techniciens de réparation agréés doivent démonter ou réparer le GoVision Pro, le démontage non

autorisé ou la réparation du GoVision Pro annulera la garantie du produit.

Manipulez le GoVision Pro avec soin, car il contient des pièces délicates. Les dommages causés par une chute, ou force extérieure ou de choc ne sont pas couverts par la garantie.

Garder le GoVision Pro à l'abri des températures extrêmes ou des conditions humides. Ne pas utiliser le GoVision Pro dans des environnements au dessus de 40 degrés Celsius ou inférieure à moins 10 degrés Celsius.

Ne branchez pas le GoVision Pro à des appareils électroniques qui ne sont pas indiquées dans ce manuel.

Ne touchez pas le produit, les connecteurs d'alimentation ou une prise murale avec les mains mouillées.

Ne pas utiliser une force excessive lors du réglage du bras de la caméra et la caméra.

Installez le produit sur une surface plane.

Gardez GoVision Pro et ses accessoires hors de portée des nourrissons, les jeunes enfants ou les animaux domestiques.

Table des Matières

Présentation du GoVision Pro	7
Contenu du carton	7
Description physique	8
Face avant	8
Face arrière	9
Préparation du GoVision Pro	10
Mise en marche	10
Connexion de la télécommande	11
Connexion d'un casque	11
Fonctions de base	12
Allumer le GoVision Pro	12
Ajuster la Camera	13
Mode Lecture	16
Mode vision de loin	17
Mode miroir	19
Utilisation de la télécommande	20
Raccourcis	21
Fonctionnalités avancées	22
Accès au Menu	22
Réglage des LED	24
Marche / Arrêt via le bouton futé	24
Réglage de l'intensité d'éclairage	24
Grossissement	25
Le Zoom	25
Mode recherche	26
Mode couleur	27
Choisir un mode de couleurs	27
Activer / désactiver un mode de couleurs	27
Définir le mode de couleur	28
Contraste	29
Guide de Lignage / fenêtrage	30
Choix des guides	30
Couleurs des guides	30
Type et position des guides	31
Choix des guides utilisés	32
Gel d'image	32
Capturer une image	32
Sauvegarde d'une image gelée	33
L'OCR (Reconnaissance optique de caractères)	34
Lancement de l'OCR	34


Activation de l'OCR	35
Langue de l'OCR	35
Orientation de la page	36
Choix du mode de lecture OCR	37
Choix de la couleur de surbrillance	38
Cadre de reconnaissance	38
Taille du cadre	39
Couleur du cadre de reconnaissance	39
Numérotation des blocs	40
Numérotation des blocs automatique	40
Le lecteur de fichiers	41
Connexion d'une clé USB	42
Gestion des fichiers	43
Consulter un fichier	45
Visualisation d'un document	46
Ajustement du grossissement	46
Changer la couleur du document	46
Navigation dans le document	47
Mode texte formaté	47
Défilement automatique	48
Mode de lecture vocale	49
Lecture vocale de document	50
Poser un marqueur	50
Informations d'un fichier	51
Dernière position	52
Réglages de la lecture de vidéo	52
Lecture	52
Répétition	52
Réglage des sous titres	53
Réglages des marqueurs	55
Information	56
Guidage vocal	56
Langues disponibles	56
Activation du guide vocal	57
Paramètres de la voix	57
Blocage mise au point	58
Fréquence Caméra	58
Compléments	59
Diaporama	59
Concevoir un diaporama	59
Réglage du diaporama	60
Horloge	60
Affichage de l'horloge	60
Réglages de l'horloge	61
Economiseur d'écran	62
Configuration utilisateur	62
Sauver une configuration	63

Rappeler une configuration	63
Initialisation	63
GoVision Pro, écran d'ordinateur ou de smartphone	65
Annexe	67
Maintenance	67
Transport	67
Stockage	69
Dépannage	70
Réparations	71
Résumé des commandes	72

Présentation du GoVision Pro

Contenu du carton


Assurez vous que tous les éléments suivants sont inclus dans votre boîte d'emballage. Si des éléments sont manquants, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.

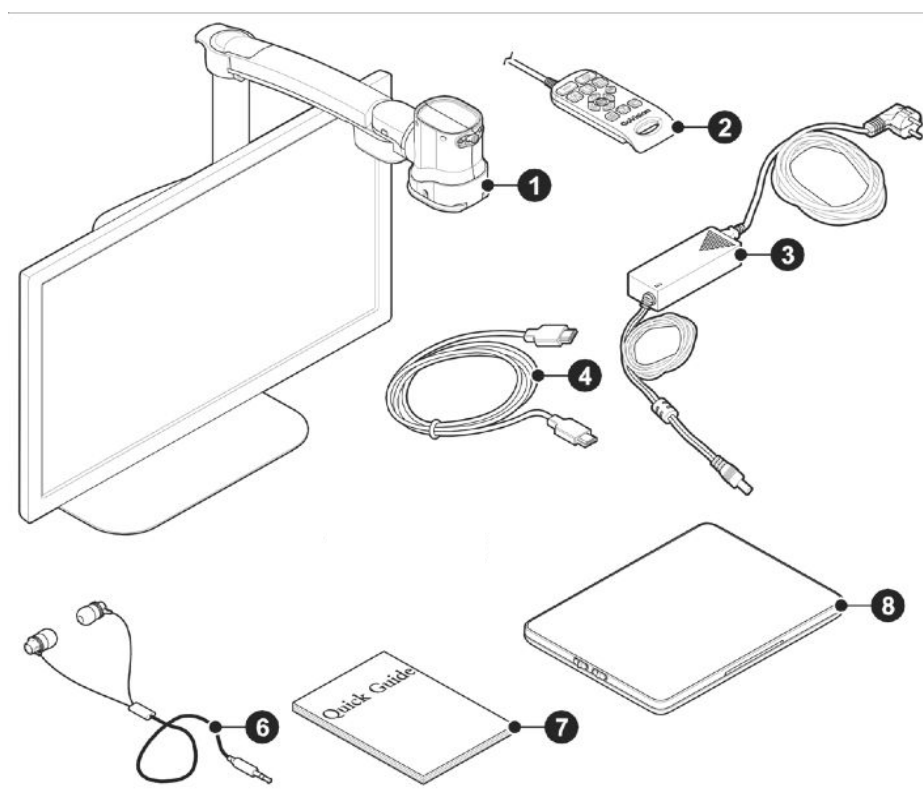

1	GoVision Pro
2	Télécommande
3	Adaptateur secteur
4	Câble HDMI
5	
6	Ecouteurs
7	Guide de démarrage rapide
8	Plateau X/Y optionnel


Description physique

Face avant

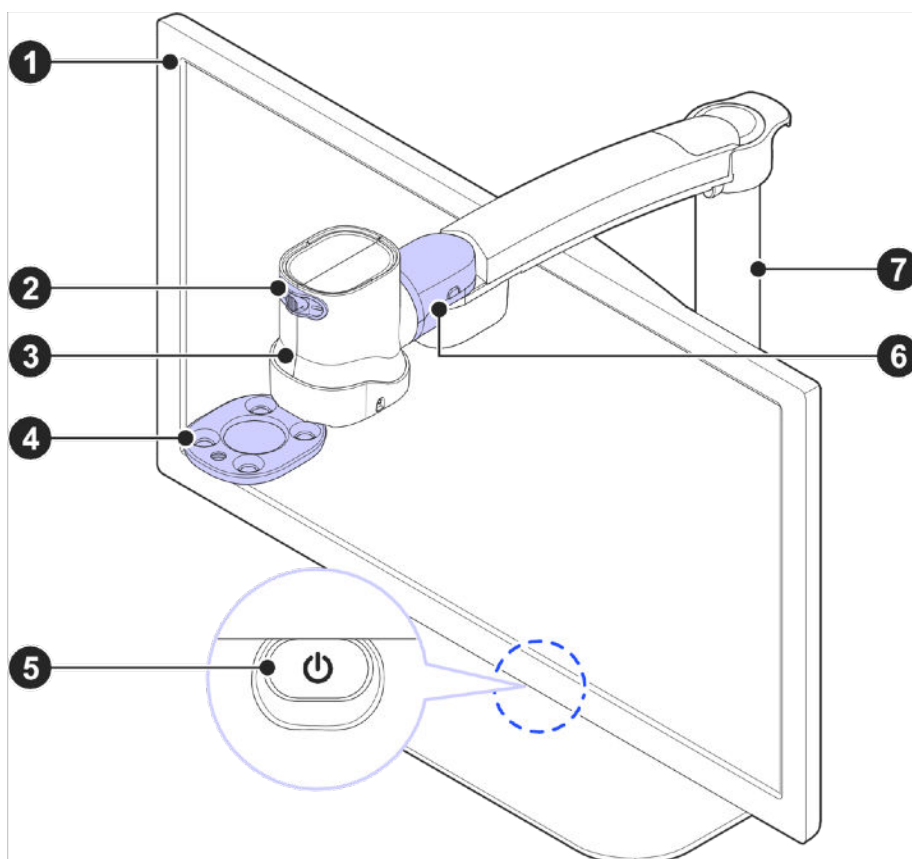

①	Ecran
②	Bouton futé
③	Camera
④	Lentille vision de près
⑤	Bouton Marche / Arrêt
⑥	Articulation
⑦	Bras de la Camera

Face arrière

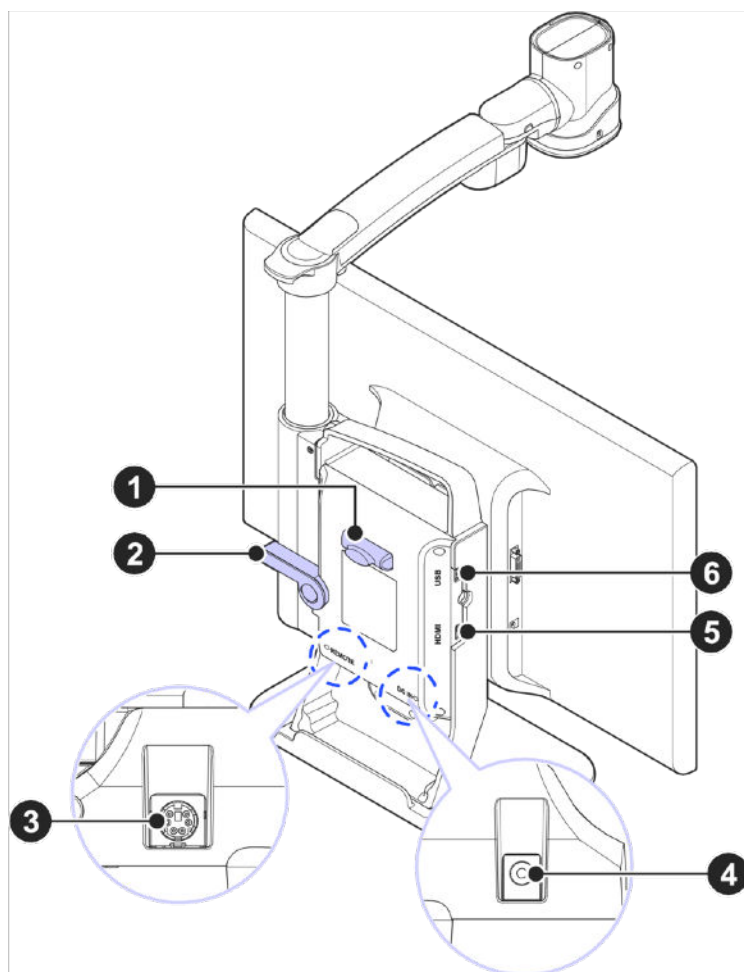


①	Support télécommande
②	Levier de verrouillage
③	Prise pour télécommande
④	Prise d'alimentation
⑤	Prise HDMI
⑥	Prise USB


Préparation du GoVision Pro

Mise en marche

Branchez l'adaptateur d'alimentation à la prise d'alimentation située en dessous, à l'arrière de l'appareil.

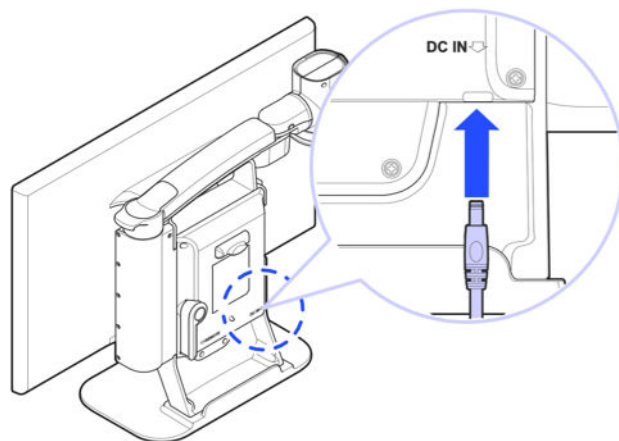


Connectez l'autre extrémité du cordon d'alimentation à une prise murale.

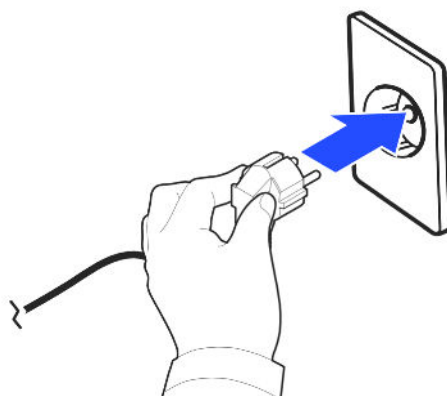

Connexion de la télécommande

Connectez le câble de la télécommande à l'arrière du GoVision Pro.

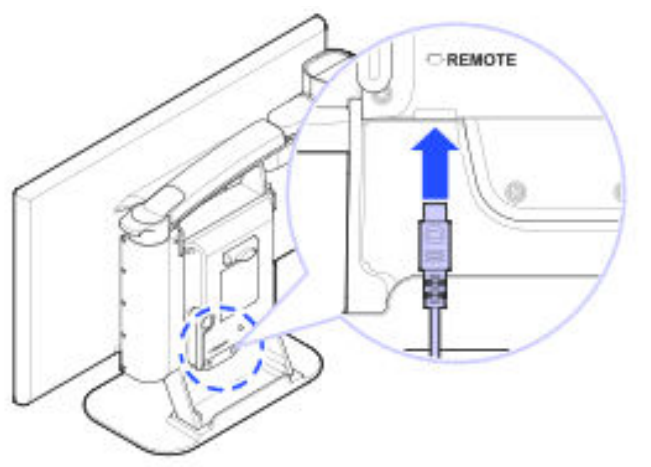

Connexion d'un casque


Le casque ou les écouteurs se connectent sur la prise située à l'arrière de la télécommande.



Fonctions de base

Allumer le GoVision Pro

Appuyez et relâchez le bouton d'alimentation situé sous l'écran.

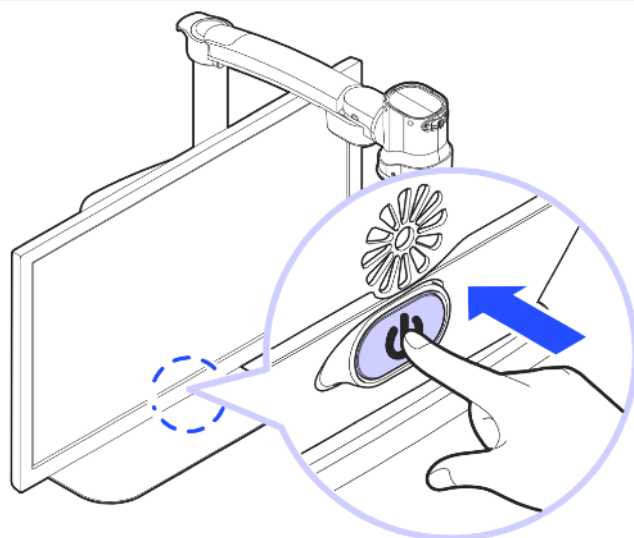


L'écran de veille apparaît, puis, au bout de quelques secondes, le GoVision Pro est prêt.




Pour éteindre l'appareil, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant plus de 3 secondes.

Ajuster la Camera


Placer le levier de verrouillage dans la position horizontale.

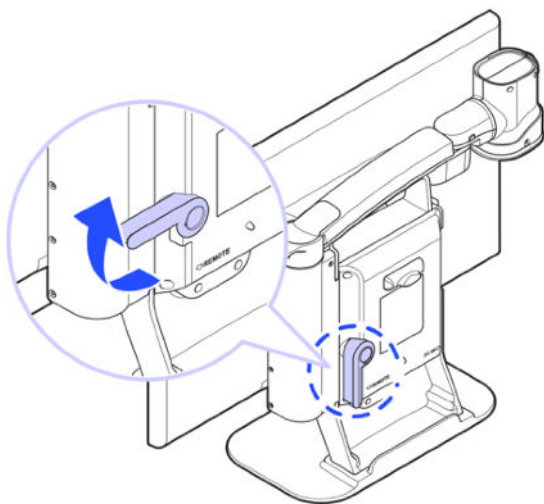


Tirez sur le bras de la caméra vers le haut.

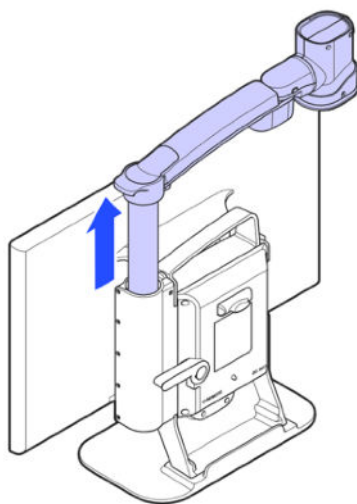


Basculer le levier de verrouillage en position verticale.

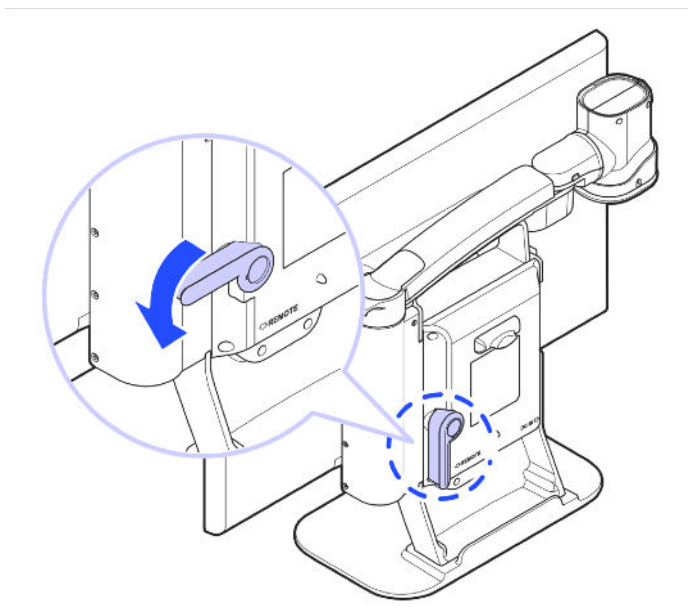


Ajuster l'orientation de la caméra en faisant tourner le bras de la caméra.

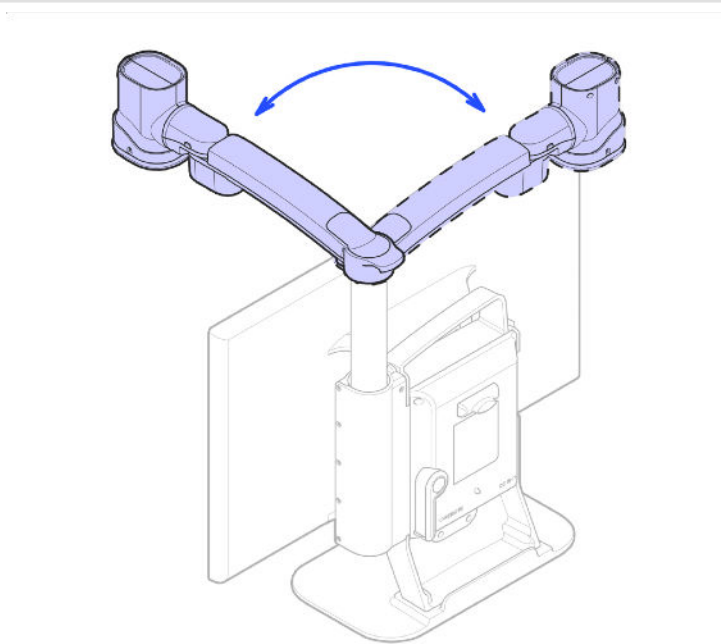

Vous pouvez déplacer la caméra vers la gauche ou vers la droite.

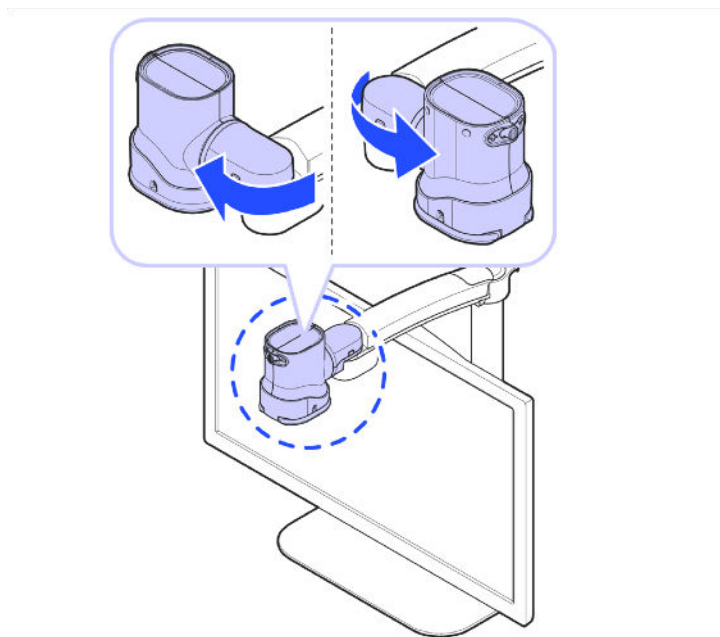


Vous pouvez tourner la caméra .

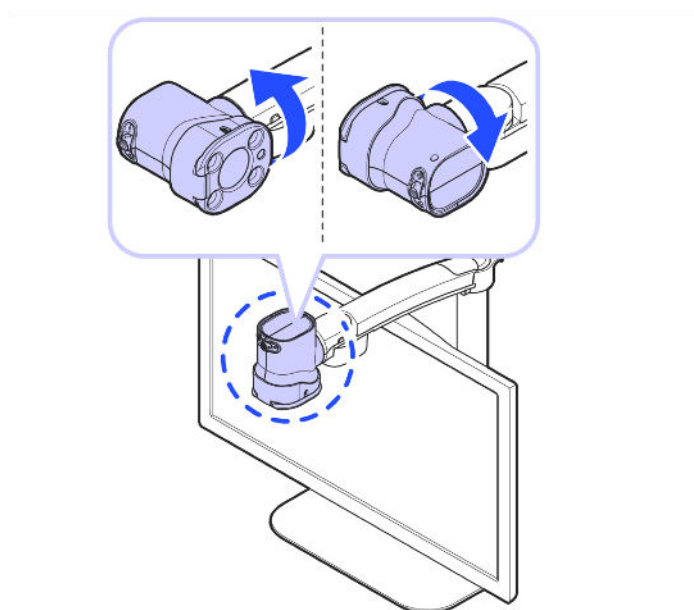


Mode Lecture

Utilisez le mode lecture pour lire ou voir des objets situés sous la caméra, comme la lecture de documents, la signature d'un chèque ou l'affichage d'une photo.


Tournez le bras de la caméra de sorte que la caméra soit face à l'avant du produit.

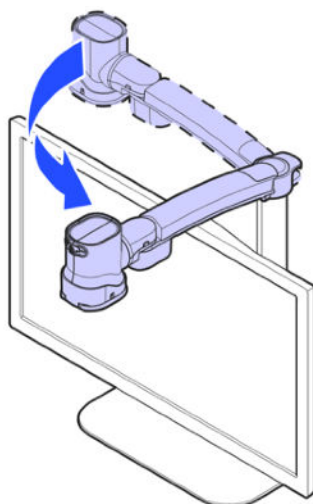

Assurez-vous que la caméra soit dirigée vers le bas.

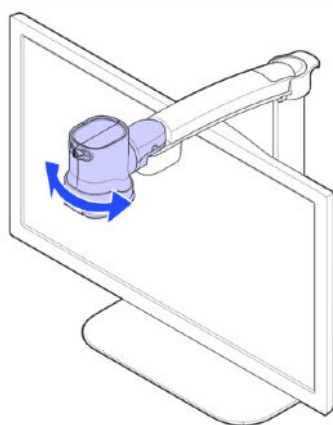


Assurez-vous que la lentille de vision de près soit fermée.

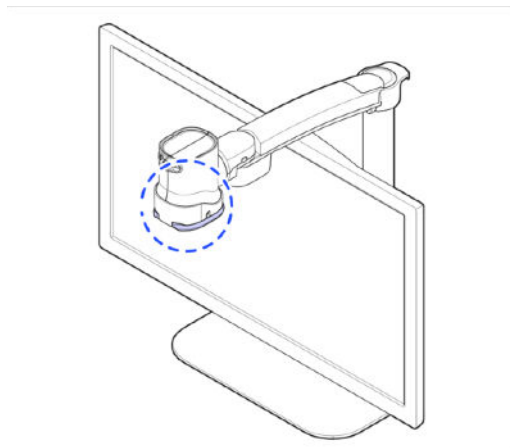


Mode vision de loin

Ce mode est utilisé lors de la consultation d'objets éloignés, comme un tableau noir dans une salle de classe.


Tournez le bras de la caméra vers l'arrière du produit.

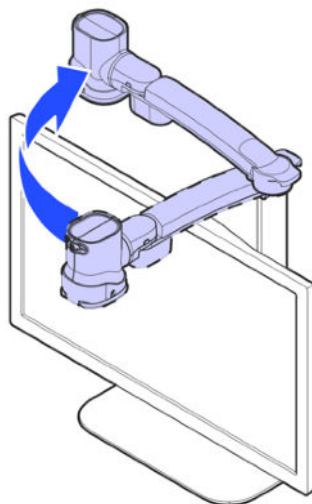

Pointer la caméra de sorte qu'elle fasse face à la cible éloignée.

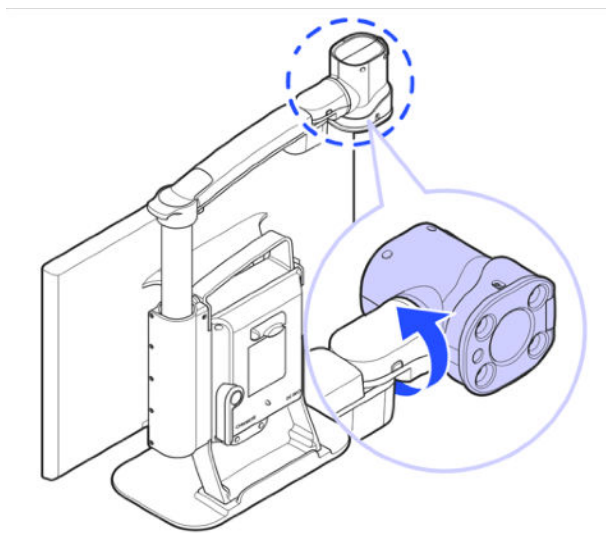

Ouvrez la lentille

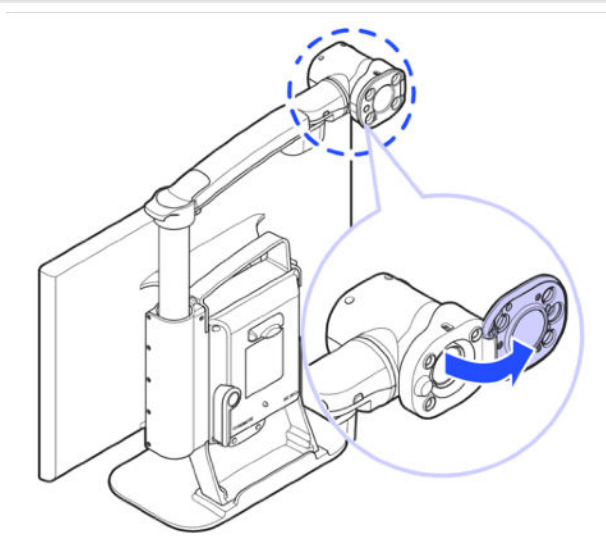


Mode miroir

Utiliser GoVision Pro comme un miroir grossissant numérique lors de maquillage ou tout autre toilettage du visage.


Note

La distance maximum entre la caméra et le visage est de 45 cm. Au delà, l'image peut être floue.


Faire pivoter la caméra vers l'avant du produit.

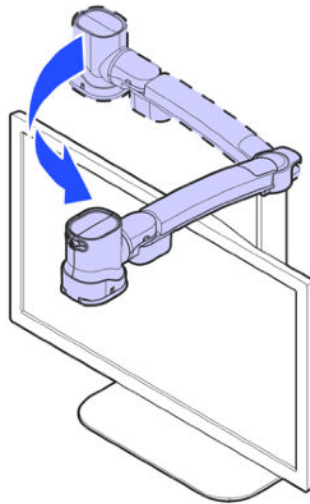

Orienter la caméra vers votre visage.

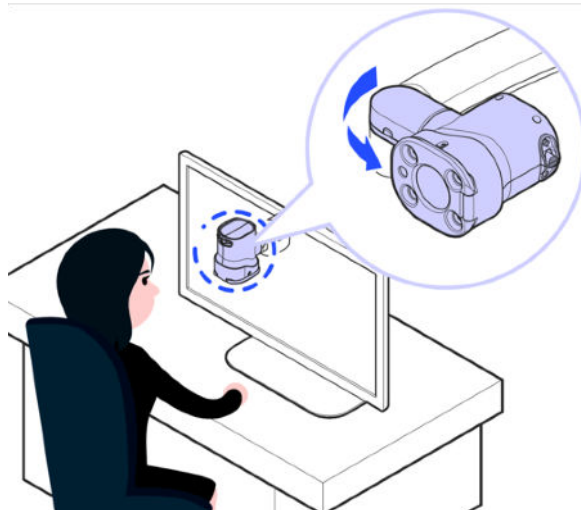

Utilisation de la télécommande

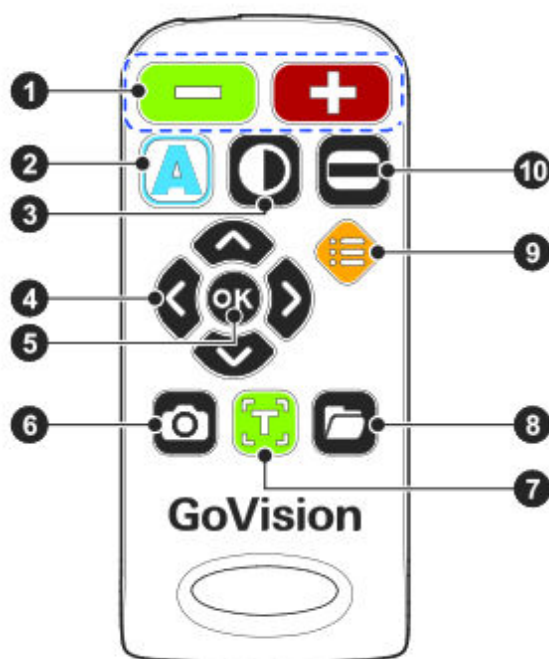

	Bouton	Fonction
①		Augmenter et diminuer le grossissement
②		Mode couleur naturelle / fort contraste
③		Réglage du contraste
④		Vers le haut, bas, gauche et droite
⑤		Validation
⑥		Gel de l'image
⑦		Lancer la lecture de texte (OCR)
⑧		Explorateur de fichiers
⑨		Menu
⑩		Lignage / fenêtrage


Raccourcis


Bouton	Fonction
Appui  ,  simultanément	Augmente le contraste
Appui  ,  simultanément	Diminue le contraste
Appui  pendant 2 secondes	Active / désactive la mise au point automatique
Appui  ou 	Ajuste le volume
Appui  ou 	Adjust la vitesse de la voix
Appui 	Sauvegarde le résultat de l'OCR
Appui  ,  simultanément	Affiche la date et l'heure
Appui  ,  ,  simultanément	Lance l'économiseur d'écran
Appui  ,  simultanément	Lance le diaporama
Appui  ,  simultanément	La fréquence de rafraichissement est sur 60Hz
Appui  ,  simultanément	La fréquence de rafraichissement est sur 50Hz

Fonctionnalités avancées




Accès au Menu

Vous pouvez utiliser le menu pour personnaliser les réglages du GoVision Pro.

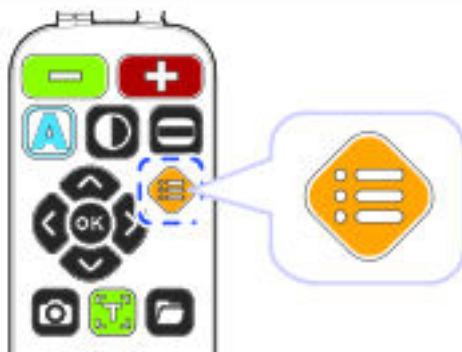Pour ouvrir le menu, appuyez [] sur la télécommande



Comment naviguer et sélectionner

Bouton	Fonction
	Sélectionner
	Vers le haut, bas, gauche et droite
	Annuler la sélection / Déplacer à l'étape précédente


Menu principal

Num	Items	
1	Eclairage	
2	Mise au point bloquée	
3	Langue reconnue par l'OCR	
4	Diaporama	
5	Horloge	
6	Options avancées	Réglage mode couleur
		Réglage des guides
		Menu vocalisé
		Paramètres OCR
		Paramètres langues
		Paramètres diaporama
		Réglage horloge
		Réglage économiseur d'écran
		Fréquence caméra
		Configuration utilisateur
		Réinitialisation d'origine
		Information produit

Réglage des LED





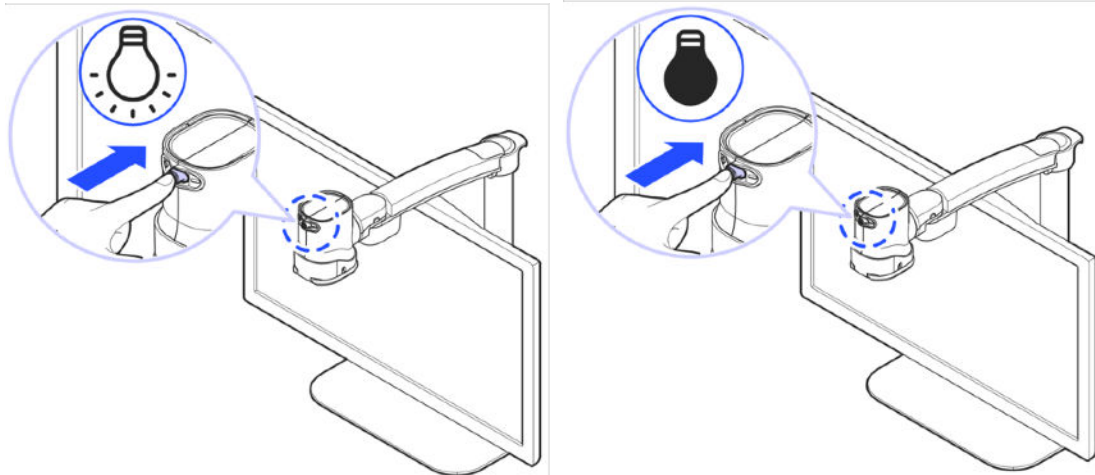

Marche / Arrêt via le bouton futé

Appuyez et maintenez le centre du « bouton futé » pendant plus de 2 secondes.



Réglage de l'intensité d'éclairage

Un papier brillant peut engendrer un éblouissement de la caméra, ou une trop forte luminosité peut être dérangement. Pour cela, l'intensité de l'éclairage est ajustable.

1. Appuyez sur []
2. Choisissez [**Eclairage**], puis []
3. Choisissez une des options, [**Eclairage désactivé**], [**Eclairage automatique**], [**Eclairage niveau 5**], **etc.** puis [] ou []
4. Pour retourner au menu précédent [] ou []


Grossissement

Le Zoom


Vous pouvez ajuster le grossissement jusqu'à x68

Pour augmenter le grossissement, appuyez [].


Pour diminuer le grossissement, appuyez [].

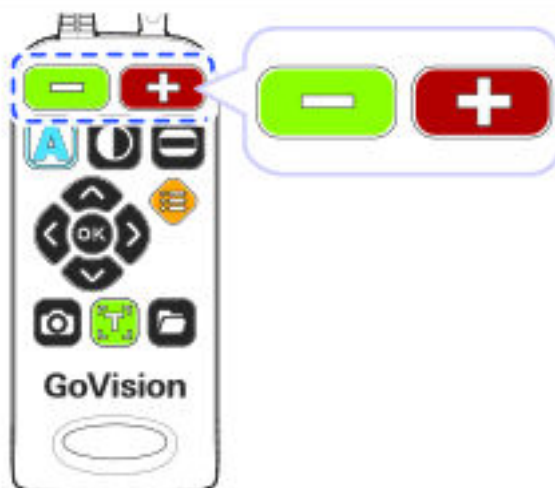


- Le grossissement peut être ajusté également grâce au bouton futé situé sur la caméra elle même.

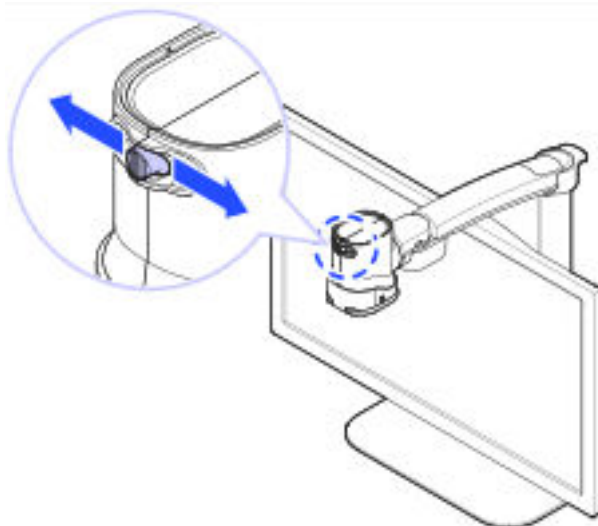

Mode recherche

1. Appuyez et maintenez [ ].

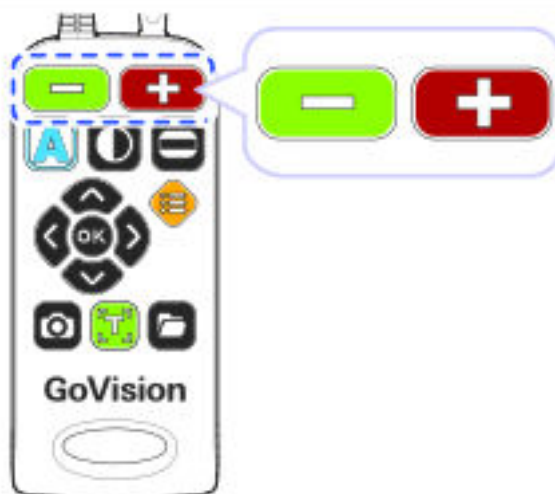

2. Le grossissement est réduit au minimum et une croix rouge [+] est visible au centre de l'écran.

This manual describes the basic feature
the HIMS GoVision.

Please be sure to read this manual thoro
the product, and keep it in a convenie
reference.

This user's guide includes product warra
well as information on how to set up Go
basic functions.

3. Relâchez les boutons de Zoom, le GoVision Pro revient au grossissement précédent.

Mode couleur

Choisir un mode de couleurs

Vous pouvez configurer votre texte et la couleur d'arrière-plan en utilisant jusqu'à 58 combinaisons de couleurs différentes.

Pour régler le niveau de contraste, appuyez sur [A].




Activer / désactiver un mode de couleurs

Le GoVision Pro propose 7 modes de couleurs, dont 4 sont activables et modifiables.

Note














[Couleurs naturelles], [Noir / Blanc], et [Blanc / Noir] sont les modes par défaut et ne sont pas modifiables.

1. Appuyez sur [Menu] et choisissez **[Fonctions avancées]**.
2. Choisissez **[Réglage mode couleur]** et appuyez sur [OK] ou [Droite].
3. Appuyez [OK] ou [Droite] sur le mode choisi.
4. Appuyez [Gauche] ou [Droite] pour activer ou désactiver le mode couleur puis [OK] pour confirmer le choix.

5. Contrôler visuellement le mode couleur puis appuyez sur .

Définir le mode de couleur

4 des 7 modes de couleurs sont modifiables par l'utilisateur avec la possibilité de personnaliser la couleur du texte et celle du fond en fonction de ses propres besoins.

1. Appuyez sur  et choisissez **[Options avancées]**.
2. Choisissez **[Réglage mode couleur]** puis  ou .
3. Appuyez  ou  pour modifier le mode de couleur choisi.
4. Utilisez  ou  pour choisir **[Activer]** et appuyez sur .
5. Utilisez  ou  pour changer la couleur du texte et  ou  pour la couleur du fond.
6. Une fois votre combinaison de couleur établie, appuyez  pour la sauvegarder.
7. La nouvelle combinaison de couleur est alors disponible.


Contraste

Si vous ne pouvez pas voir clairement le texte du document, vous pouvez régler précisément le niveau de contraste en 40 niveaux.

Pour régler le niveau de contraste, appuyez sur



Appuyez les touches [< >] de direction pour régler le contraste.

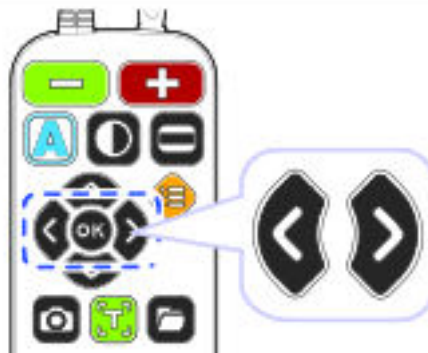

Appuyez sur [OK] pour appliquer le niveau de contraste sélectionné



Guide de Lignage / fenêtrage

Utilisez des guides pour suivre votre lecture, ou pour définir l'affichage de fenêtres sur l'écran.

Choix des guides



Pour sélectionner un type de guide, appuyez sur []:



- ligne horizontale
- ligne verticale
- fenêtre horizontale
- fenêtre verticale

Couleurs des guides

Lorsqu'une ligne est visible sur l'écran, vous pouvez ajuster les couleurs.

1. Appuyez et maintenez [], puis appuyez successivement sur [] pour choisir la couleur.



2. Relâchez les deux touches.

Note

Les couleurs disponibles sont : Texture, Blanc, Noir, Jaune, Cyan, Vert, Magenta, Rouge, Bleu

Type et position des guides

① Ligne horizontale

This manual describes the basic features of the HIMS GoVision.

Please be sure to read this manual thoroughly before using the product, and keep it in a convenient place for reference.

This user's guide includes product warranty information as well as information on how to set up GoVision basic functions.

Appuyez [] ou [] pour déplacer la ligne

② Ligne verticale


This manual describes the basic features of the HIMS GoVision.


Please be sure to read this manual thoroughly before using the product, and keep it in a convenient place for reference.



This user's guide includes product warranty information as well as information on how to set up GoVision basic functions.

Appuyez [] ou [] pour déplacer la ligne.


③ Fenêtre horizontale



Please be sure to read this manual thoroughly before using the product, and keep it in a convenient place for reference.

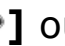


Appuyez [] ou [] pour augmenter ou réduire la taille de la fenêtre

④ Fenêtre verticale

 describes the basic features of the HIMS GoVision.
Please be sure to read this manual thoroughly before using the product, and keep it in a convenient place for reference.

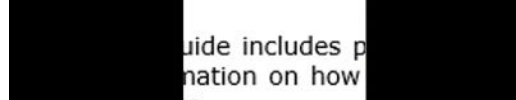 This user's guide includes product warranty information as well as information on how to set up GoVision basic functions.

Appuyez [] ou [] pour augmenter ou réduire la taille de la fenêtre

Choix des guides utilisés

1. Choisissez **[Réglage des guide]**, puis [OK] ou [➤]
2. Sélectionnez le type de guide puis appuyez [OK] ou [➤]
3. Si vous choisissez « pas de guide », les guides sont désactivés et aucun ne s'affiche alors.

Gel d'image

Capturer une image

Pour geler une image pendant, ou pour enregistrer une image pour un visionnage ultérieur, vous devez en premier capturer une image.

Appuyez sur [📷], et [❄️], apparaît en haut à droite de l'écran.






Vous pouvez régler le zoom et le mode couleur comme vous pouvez le faire lors de la visualisation d'une image en direct.

Pour revenir à l'affichage en direct, appuyez sur [📷] de nouveau.

Sauvegarde d'une image gelée

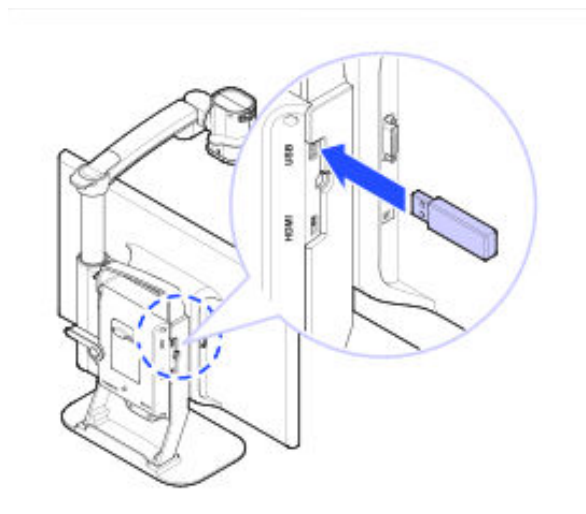1. Connectez à la prise USB située à l'arrière du GoVision Pro, votre clé USB.



2. Lorsque l'image est gelée, appuyez et maintenez [] pendant 2 secondes.
3. Lorsque [] est affichée et énoncée, l'image est mémorisée dans la clé USB

Note

Les images sont stockées sur la clé USB avec les formats de nom de fichier suivantes.


Exemple) / GV100/Image/MMDDYYYYhhmm.jpg


L'OCR (Reconnaissance optique de caractères)

L'OCR vous permet de lire des documents dactylographiés à haute voix à l'aide de la synthèse vocale intégrée.





Lancement de l'OCR

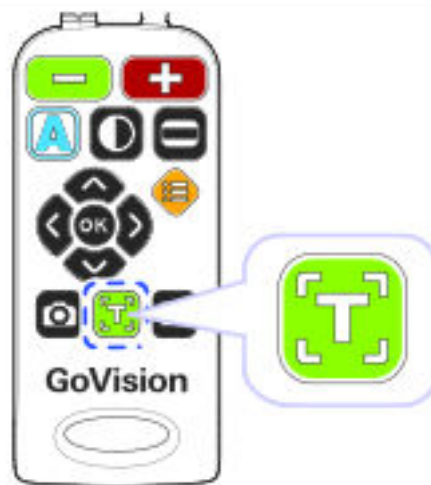Lorsque le document est affiché sur l'écran, appuyez sur


[] de la télécommande.




Le texte du document est analysé puis est lu à haute voix.

Utilisez [ ] pour se déplacer entre les phrases, et [ ] pour se déplacer entre paragraphes.

Appuyez sur [] pour mettre en pause et reprendre la lecture.

Pour quitter la fonction de lecture, appuyez sur [] de nouveau.

Pour retourner au mode Vidéo-agrandisseur, appuyez sur [].

Note

L'OCR est accompli en utilisant la caméra OCR pleine page. En mode OCR, la plupart des fonctions ne peuvent pas être utilisées à l'exception des fonctions telles que le mode de lecture, les paramètres de voix ou les paramètres de guide de colonne.




Activation de l'OCR

La fonction d'OCR peut être activée ou désactivée, pour cela:

1. Appuyez sur .
2. Choisissez **[Options avancées]**, puis
3. Choisissez **[Paramètres OCR]**, puis  ou .
3. Choisissez **[Activation OCR]** puis  ou .

Langue de l'OCR

Une seconde langue de reconnaissance peut être activée afin de lire un document contenant 2 langues.

1. Appuyez sur .
2. Choisissez **[langue reconnue par l'OCR]**, puis
3. Choisissez votre langue et appuyez sur  ou .

Note

Le Français est la langue par défaut et n'est pas modifiable.

Pour ajuster l'intonation, le volume et la vitesse, se référer aux réglages de la voix.

Orientation de la page

Si la reconnaissance n'est pas correcte, cela peut être dû au document qui n'est pas parfaitement aligné, horizontal.


1. Appuyez [] et choisissez **[options avancées]**
2. Choisissez **[Paramètres OCR]**, puis [] ou [].
3. Choisissez **[Traitement de l'orientation de la page]** puis appuyez [] ou [] afin de cocher l'option.

Note

Par défaut, l'option est cochée et le traitement effectué..

Choix du mode de lecture OCR

Vous pouvez modifier la mise en page du le texte reconnu et affiché à l'écran.

1. Appuyez sur [.
3. Sélectionnez [**Mode visuel de l'OCR**] puis [.

Les Modes de lecture OCR sont alors :

- Image réelle
- Texte formaté
- Ligne défilante
- Mot défilant

① **Image réelle: L'image originale du document est affichée**

This manual describes the basic feature the HIMS GoVision.

Please be sure to read this manual thoro the product, and keep it in a convenie reference.

This user's guide includes product warra well as information on how to set up Go basic functions.

② **Texte Formaté: Le texte occupe tout l'écran**

E-bot Intelligent eyes
for your education The
new Mainstream
compatible E-bot for
every life style. Study,

③ **Ligne défilante: Le texte est affiché sur une ligne défilante**











life style. Study, work, o

① **Mot défilant: Les mots lus s'affichent les uns après les autres.**

life

Choix de la couleur de surbrillance

Lorsque l'image originale est affichée lors de la lecture , le mot prononcé est mis en évidence par un cadre coloré dont les couleurs interne et externe sont modifiables.

1. Appuyez [] et sélectionnez [**Options avancées**]
2. Sélectionnez [**Paramètres OCR**], puis [] ou [].
3. Sélectionnez [**Couleur du curseur vocalisé**] puis [] ou [].
4. Appuyez [] ou [] pour changer la couleur du cadre extérieur , et appuyez [] ou [] pour modifier la couleur du cadre intérieur.
5. Une fois la combinaison de couleurs choisie, appuyez [] pour sauver.
6. La combinaison de couleurs est utilisée dans le mode de lecture « Image Réelle ».

Note








Les couleurs disponibles sont: Blanc, Noir, Jaune, Cyan, Vert, Magenta, Rouge et Bleu.

Cadre de reconnaissance

GoVision PRO prend en charge l'OCR en plein écran. Vous pouvez choisir d'utiliser ou non le cadre de reconnaissance. Il vous donne une zone encadrée sous laquelle placer le document et qui peut être ajustée pour s'adapter à la taille de la page que vous numérisez.











Lorsque le cadre de reconnaissance est utilisé, la zone de visualisation à l'extérieur du cadre est traitée en noir et seul ce qui est à l'intérieur du cadre est reconnu.

Lorsque le cadre de guidage OCR est désactivé, toute la zone de visualisation subit une reconnaissance de caractères.

1. Appuyez [] et choisissez **[options avancées]**
2. Choisissez **[Paramètres OCR]**, puis [] ou [].
3. Choisissez **[Cadre de reconnaissance]** puis appuyez [] ou []
4. Choisissez **[Cadre de reconnaissance actif]** puis appuyez [] ou []


Taille du cadre

La taille du cadre de reconnaissance est ajustable entre A4, A3 et lettre (format américain).

1. Appuyez [] et choisissez **[options avancées]**
2. Choisissez **[Paramètres OCR]**, puis [] ou [].
3. Choisissez **[Cadre de reconnaissance]** puis appuyez [] ou []
4. Choisissez **[taille du cadre]** puis appuyez [] ou []
5. Appuyez [] ou [] pour choisir la taille
6. appuyez [] pour valider

Couleur du cadre de reconnaissance

La couleur du cadre de guidage est modifiable pour avoir un meilleur contraste.

1. Appuyez [] et choisissez **[options avancées]**

2. Choisissez [**Paramètres OCR**], puis [OK] ou [➤].
3. Choisissez [**Cadre de reconnaissance**] puis appuyez [OK] ou [➤].
4. Choisissez [**Couleur du cadre**] puis appuyez [OK] ou [➤].
5. Appuyez [⬅] ou [➤] pour choisir la couleur puis appuyez [OK] pour valider.

Numérotation des blocs

La numérotation des blocs est une fonction qui divise le texte reconnu par paragraphe lors de l'utilisation de l'OCR. La division en blocs peut être activée ou désactivée.








1. Appuyez [☰] et choisissez [**options avancées**].
2. Choisissez [**Paramètres OCR**], puis [OK] ou [➤].
3. Choisissez [**Numérotation des blocs**] puis appuyez [OK] ou [➤].
4. Choisissez [**Numérotation des blocs actif**] puis appuyez [OK] ou [➤].

Numérotation des blocs automatique

Cette fonction détecte automatiquement les paragraphes reconnus et les numérote.

Si vous sélectionnez le réglage automatique pour la numérotation des blocs, la fonction sera activée et lira les paragraphes dans l'ordre de gauche à droite, puis de haut en bas.

Lorsqu'il est désactivé, le GoVision Pro lira les paragraphes dans l'ordre spécifié par l'utilisateur.

1. Appuyez [] et choisissez [**options avancées**]
2. Choisissez [**Paramètres OCR**], puis [] ou [].
3. Choisissez [**Numérotation des blocs**] puis appuyez [] ou []
4. Choisissez [**Numérotation des blocs automatique**] puis appuyez [] ou []

Le lecteur de fichiers


Vous pouvez utiliser le lecteur de fichiers pour afficher des photos, des résultats d'OCR, des vidéos ou des documents texte.


Formats de fichiers lus

Fichiers	Format
Document	MS Word 97~2014 (doc, .docx, .dot, .dotx), Text (.txt), Rich Text (.rtf), PDF
Image	PNG, BMP, JPG(JPEG)
Video (Codec)	MP4(H.263, H.264), 3GP
Sous titres	smi, srt

Connexion d'une clé USB

Branchez le câble USB au port USB à l'arrière de l'appareil.

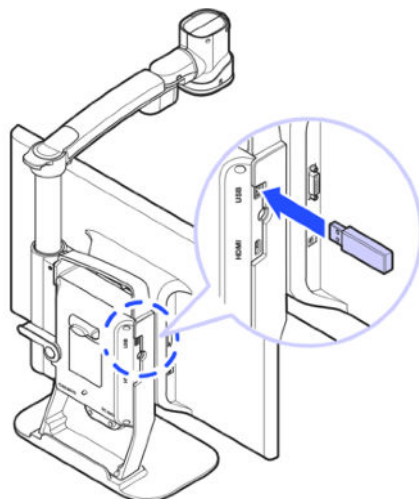


Appuyez [] sur la télécommande.



La liste des images, des fichiers vidéo, des documents et les dossiers, apparaît sur l'écran.

Utilisez les touches [ ] pour naviguer dans la liste, et appuyez sur [] pour ouvrir le fichier désiré.







Pour fermer le document, appuyez sur [] de nouveau

Gestion des fichiers

Déplacement de fichier

1. Appuyez [] sur la télécommande.



2. Le contenu de la clé USB apparaît à l'écran, fichiers et dossiers.
3. Appuyez sur [] pour ouvrir le menu des fichiers et choisissez [**Selection multiple**] par un appui sur [].
4. Sélectionnez alors avec [] ou [] les fichiers et dossiers. Une coche est s'affiche alors devant les fichiers sélectionnés.
5. Afin de déplacer la sélection, appuyez [], puis sélectionnez [**Copier**] ou [**Couper**].
6. Déplacez vous alors à l'endroit de destination, puis appuyez sur [] de nouveau. Choisissez [**Coller**].
7. Pour fermer le menu, choisissez [**Quitter**].

Filtrer les documents





Utilisez les combinaisons de touches suivantes pour n'afficher qu'un type de fichiers

Bouton	Fonction
 et  simultanément	Affiche uniquement les images et vidéo
 et  simultanément	Affiche uniquement les fichiers d'OCR
 et  simultanément	Affiche uniquement les documents

Suppression de fichiers

1. Appuyez [] sur la télécommande.






2. Le contenu de la clé USB apparaît à l'écran, fichiers et dossiers
3. Appuyez [] pour ouvrir le menu des fichiers et choisissez **[Selection multiples]**.
4. Appuyez [] ou [] pour sélectionner les fichiers et / ou dossiers à supprimer.
5. Appuyez [] et choisissez **[Effacer]**.

6. Pour confirmer, choisissez [**Oui**]
7. Pour quitter, choisissez [**Quitter**].

Consulter un fichier



1. Appuyez [] sur la télécommande.




2. Le contenu de la clé USB apparaît alors à l'écran.
3. Utilisez [] ou [] pour naviguer jusqu'au fichier désiré, puis [].
4. Le GoVision Pro affiche alors le fichier selon le type de fichier, Vidéo, Photo ou document texte.
5. Pour quitter la consultation du document, appuyez sur [].


Visualisation d'un document


Ajustement du grossissement


Lorsqu'un document présent sur la clé USB est affiché, appuyez sur [ ] sur la télécommande afin d'ajuster le grossissement

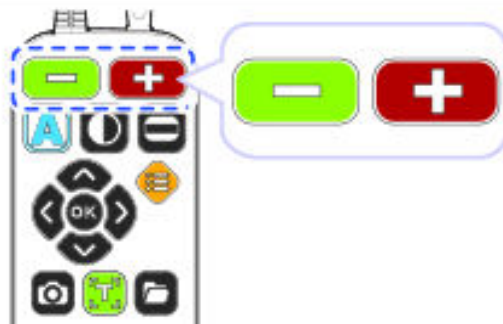



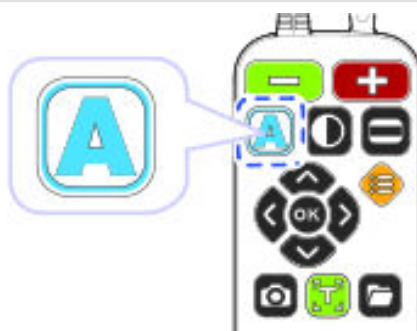


Changer la couleur du document

1. Appuyez sur [] pour changer le mode de couleur
Couleur du texte / couleur du fond.



2. A chaque appui, une nouvelle combinaison de couleur est sélectionnée. [].

Navigation dans le document








fonctions	Bouton
Navigation par ligne	Appuyez [] ou []
Navigation par page	Appuyez [] ou [] deux fois rapidement
Revenir en début de ligne	Appuyez sur []

Note



Le retour au premier caractère n'est possible que dans le mode « image réelle »

Mode texte formaté

Lorsque le mode ligne est activé, le texte du document est remis en page de telle sorte que chaque ligne remplisse l'écran de la gauche à droite.

1. Appuyez sur [] sur la télécommande pendant que le document est affiché.
2. Dans le menu, choisissez [**Mode de visualisation**], puis [] ou [].
3. Sélectionnez alors le mode de représentation du document, « Image réelle » ou « Mode texte formaté », puis [] ou [].
4. Pour revenir au document, appuyez sur [] ou [].

Mode de visualisation d'un document

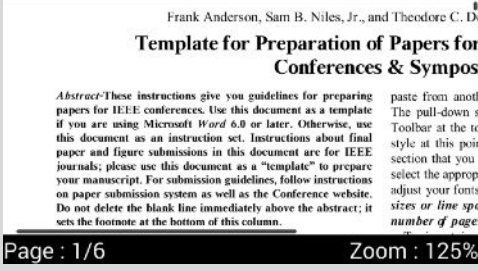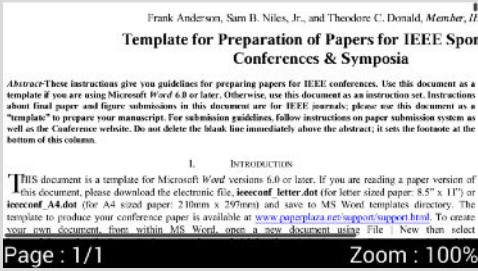Mode	Image sur l'écran	Fonction
Mode Normal		Le texte est affiché comme il l'est sur le document d'origine.
Mode formaté		Le texte est reformaté afin que chaque ligne occupe toute la largeur de l'écran.









Note

Le mode formaté n'est pas supporté pour les fichiers PDF.








Défilement automatique

Cette option permet de visualiser un document avec un défilement automatique du contenu à l'écran, sans avoir besoin de se déplacer manuellement dedans avec les flèches.



1. Appuyez sur [] lorsque le document est affiché.
2. Le défilement automatique commence alors.
3. Appuyez sur [] pour ajuster la vitesse.
4. Choisissez [**Vitesse de lecture automatique**] puis ajustez la vitesse avec [] ou []
5. Pour arrêter le défilement automatique, appuyez de nouveau sur []
6. Pour revenir à l'affichage du document, appuyez sur [].

Mode de lecture vocale


Ce mode définit comment le texte du document sera affiché visuellement pendant la lecture vocale.


1. Appuyez sur [] de la télécommande pendant la visualisation d'un document.
2. Dans le menu, choisissez [**Mode de lecture vocale**], puis [] ou [].
3. Choisissez le mode désiré « Image réelle » ou « Ligne défilante » puis [] ou [].
4. Pour revenir au document, appuyez sur [] ou [].

Mode de visualisation

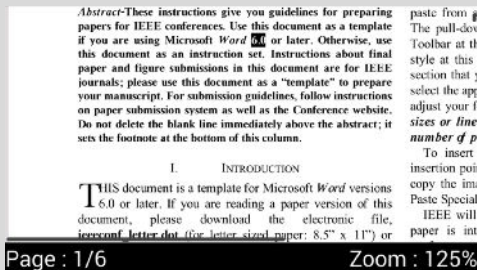Mode	Image à l'écran	Fonction
Image réelle		Le document s'affiche comme l'original.
Ligne défilante		Le texte s'affiche sur une seule ligne à l'écran et se déplace au fur et à mesure de la lecture

Lecture vocale de document



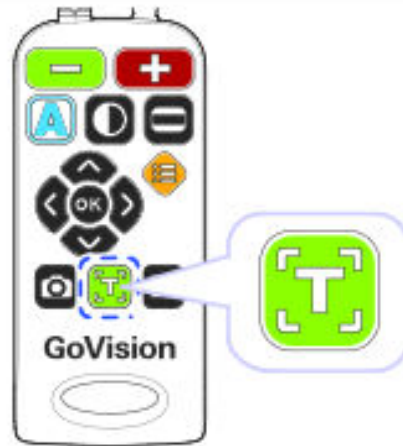







Lorsqu'un document est affiché, appuyez sur [] de la télécommande. La lecture vocale du document commence alors.









Poser un marqueur

Un marqueur peut être placé dans le document afin d'y retourner directement plus tard.

Pose d'un marqueur




1. Appuyez sur [] de la télécommande pendant qu'un document est affiché.
2. Dans le menu, choisissez [**Marqueur**], puis [] ou [].
3. Choisissez [**Place un marqueur**] puis [] ou [].
4. Appuyez [] ou [] pour choisir le numéro du marqueur, de 1 à 5, puis appuyez sur [].
5. Pour sortir du menu, appuyez sur [] ou [].



Aller à un marqueur

1. Appuyez sur [] de la télécommande pendant qu'un document est affiché.
2. Dans le menu sélectionnez [**Marqueur**], puis [] ou [].
3. Sélectionnez [**Aller au marqueur**], puis [] ou [].
4. Appuyez [] sur le marqueur choisi.
5. Vous êtes alors positionné dans le document, au marqueur choisi.

Informations d'un fichier

Affiche les informations d'un fichier dont le nom, le type de fichier, le chemin, la taille.

1. Appuyez sur [] de la télécommande pendant qu'un document est affiché.
2. Dans le menu sélectionnez [**Information fichier**], puis [] ou [].
3. Les information du fichier courant sont alors affichées.

Nom
Type
Chemin
Taille
Page
4. Pour sortir du menu, appuyez sur [] ou [].

Dernière position







Le GoVision Pro mémorise automatiquement lorsque vous quittez un document, la dernière position affichée du text, afin qu'à la prochaine ouverture du document, le GoVision Pro vous propose de vous positionner directement à cette position.

Sélectionnez **[Oui]** pour aller directement à la position ou **[Non]** pour aller au début du document

Réglages de la lecture de vidéo


Lecture

Pendant la lecture d'un film ou d'une vidéo, les fonctions suivantes sont disponibles.

Bouton	Fonction
	Lecture / Pause.
	Choix de la couleur ds sous titres.
 ou 	Se déplacer entre les sections du film.
 ou 	Ajustement du volume.

Répétition

La fonction répétition permet de choisir et répéter une section de la vidéo .

1. Appuyez  de la télécommande au début de la zone à répéter, puis continuez la lecture.



2. Utiliser [◀] ou [▶] pour aller à la fin de la zone à répéter.
3. Appuyez [T] pour lire la zone choisie.
4. Pour stopper la répétition, pendant la lecture, appuyez sur [T] .

Réglage des sous titres











pendant la lecture du vidéo ou d'un film, la synchronisation, la taille et la couleur des sous titres sont modifiables.

Activation des sous titres









1. Appuyez sur [Menu] de la télécommande
2. Dans le menu, sélectionnez [**Réglage sous titres**], puis [OK] ou [▶].
3. Appuyez sur [OK] ou [▶] pour activer ou désactiver les [**Sous titres**]
4. Pour sortir du menu, appuyez sur [Menu] ou [◀].

Synchronisation des sous titres

Si, pour quelques raison que se soit, les sous titres ne correspondent pas parfaitement avec la vidéo, vous pouvez ajuster leur synchronisation.










1. Appuyez sur [] de la télécommande pendant la lecture.
2. Dans le menu, sélectionnez [**Réglage sous titres**], puis [] ou [].
3. Sélectionnez [**Synchro sous titres**], puis [] ou [].
4. Utilisez [] ou [] pour ajuster puis appuyez sur [].
5. Pour sortir du menu, appuyez sur [] ou [].

Sous titres : Taille / Position / couleur










1. Appuyez sur [] de la télécommande pendant la lecture.
2. Dans le menu, sélectionnez [**Réglage sous titres**], puis [] ou [].
3. Choisissez le paramètre à modifier.
 - Taille sous titres
 - Position sous titres
 - Couleur sous titres
 - Couleur fin sous titres
4. Utilisez [] ou [] pour ajuster puis appuyez sur [].
5. Pour sortir du menu, appuyez sur [] ou [].

Réglages des marqueurs

Mémoriser un marqueur




1. Appuyez sur [] à la position désirée pour le signet
2. A partir du menu, choisissez [**Marqueur**], puis [] ou [].
3. Choisissez [**Placer un marqueur**] puis [] ou [].
4. Choisissez un numéro pour le signet de 1 à 5, puis [] ou [].
5. Pour sortir du menu, appuyez sur [] ou [].

Aller à un marqueur

1. Appuyez sur [] pendant la lecture.
2. A partir du menu, choisissez [**Marqueur**], puis [] ou [].
3. Sélectionnez [**Aller au marqueur**] puis [] ou [].
4. Choisissez le marqueur où vous désirez aller, puis [] ou [].
5. La lecture de la vidéo reprends alors à partir du marqueur.
6. Pour sortir du menu, appuyez sur [] ou [].

Information

Cette option affiche les informations relatives au fichier en cours de lecture.

1. Appuyez sur [] pendant la lecture.
2. Dans le menu, choisissez [**Information**], puis [] ou [].
3. Les informations concernant la vidéo actuellement lue sont affichés.



Fichier:

Type:

Durée:

Taille:






Chemin:

4. Pour sortir du menu, appuyez sur [] ou [].

Guidage vocal






Langues disponibles

Par commodité, vous pouvez changer la langue Française des menus et messages affichés et parlés.





1. Appuyez sur [] de la télécommande, puis choisissez [**Options avancées**].
2. Sélectionnez [**Paramètres langues**], puis [] ou [].
3. Choisissez une langue, puis [] ou [].

Activation du guide vocal





Différents paramètres de la voix du retour vocal sont ajustable:

1. Appuyez sur [>] de la télécommande, puis choisissez [**Options avancées**].
2. Choisissez [**Menu vocalisé**], puis [>] ou [].
3. Choisissez [**Guide vocal**], puis [>] ou [] afin de l'activer ou le désactiver.

Note





Lors de la visualisation de document, ajustez le volume grâce à [>] et [>], et la vitesse d'élocution grâce à [>] et [].

Paramètres de la voix

1. Sélectionnez un des paramètres puis [>] ou [>] pour modifier la valeur
 - Volume
 - Vitesse
 - Intonation
 - Personnes
4. Pour sortir du menu, appuyez sur [>] ou [].

Blocage mise au point


Dans certains cas, comme par exemple lorsque vous écrivez sous la caméra, il peut être nécessaire de bloquer la mise au point automatique, afin que la mise au point reste bloquée.

1. Appuyez [] sur la télécommande.
2. Sélectionnez [**Mise au point bloquée**], puis [] ou [].
3. Le symbole de verrouillage [] est alors visible à l'écran.

This manual describes the basic features of the HIMS GoVision.






Please be sure to read this manual thoroughly before using the product, and keep it in a convenient place for reference.

This user's guide includes product warranty information as well as information on how to set up GoVision basic functions.

4. Pour revenir à une mise au point automatique, c'est à dire autofocus actif, sélectionnez de nouveau [**Mise au point bloquée**] et le symbole [] disparaît.

Fréquence Caméra

Si vous discernez des lignes grises, horizontales ou fluctuante à l'écran, vous pouvez changer la fréquence de la caméra.

1. Appuyez [] sur la télécommande et choisissez [**Options avancées**].
2. Sélectionnez [**Fréquence Caméra**], puis [] ou [].
3. Sélectionnez la fréquence 50Hz ou 60Hz, puis [] ou [].

Compléments

Diaporama

Vous pouvez afficher vos photos numériques sur l'écran de GoVision Pro et les regarder comme un diaporama.


Note


La première fois qu'une clé USB est branchée sur le GoVision Pro, un dossier **[GoVision Pro]** est automatiquement créé.

Concevoir un diaporama

Enregistrer des images dans le dossier **[Slide]** du dossier **[GoVision Pro]** sur la clé USB.

Connectez la clé USB contenant les photos sur le port USB à l'arrière du produit.

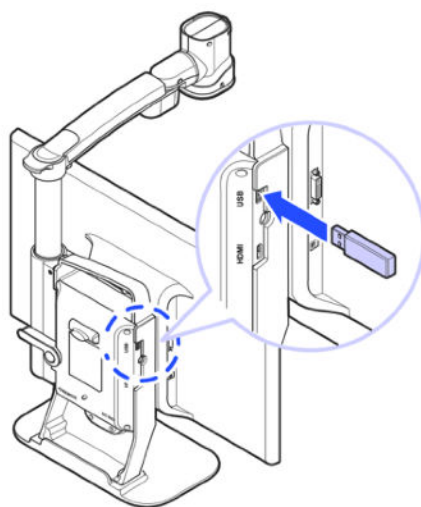



Appuyez [].








Sélectionnez **[Diaporama]**, puis [] ou [].

Les images s'affichent sur l'écran.

Note

Appuyez [] et [] simultanément pour lancer le diaporama.






Réglage du diaporama

1. Appuyez [] sur la télécommande et choisissez **[Options avancées]**.
2. Sélectionnez **[Paramètres Diaporama]**, puis [] ou [].
3. Choisissez l'intervalle d'affichage de chaque image du diaporama, puis [] ou [].
 - 3 secondes
 - 5 secondes
 - 7 secondes
 - 10 secondes
5. Pour sortir du menu, appuyez sur [] ou [].



Horloge


Pendant l'utilisation du GoVision Pro une horloge peut être affichée.


Affichage de l'horloge

1. Appuyez [] sur la télécommande.
2. Choisissez **[horloge]**, puis [] ou [].
3. Pour sortir du menu, appuyez sur [] ou [].










Note

Un appui sur [] et [] simultanément affiche l'horloge à l'écran.

Une fois l'horloge affichée, appuyez sur [] change les couleurs de l'horloge.

Une fois l'horloge affichée, appuyez sur [] lit vocalement l'horloge.



Réglages de l'horloge

1. Appuyez sur [] sur la télécommande et choisissez **[Options avancées]**.
2. Choisissez **[Réglage horloge]**, puis [] ou [].
3. Sélectionnez **[Set time and date]**, puis [] ou [].
4. Utilisez [] ou [] et [] ou [] pour modifier les valeurs












5. Appuyez sur [] pour valider et sortir.

Note




Afin de changer le mode 12 ou 24 heures, choisissez **[12 time format]** ou **[24 time format]** dans **[Réglage horloge]**, puis [] ou [].

Economiseur d'écran

Afin de protéger l'écran sur le long terme, vous pouvez utiliser les photos du diaporama, ou l'horloge comme économiseur d'écran.

1. Appuyez [] sur la télécommande et choisissez [Options avancées].
2. Sélectionnez [**Réglage économiseur d'écran**], puis [] ou [].
3. Choisissez [**Horloge**] ou [**Diaporama**], puis [] ou [].
4. Choisissez [**Réglages mise en veille**], puis [] ou [].
5. Choisissez entre « Economiseur d'écran désactivé » et 5, 10, 30 minutes ou 1 heure avant l'activation de l'économiseur d'écran, puis appuyez sur [] ou [].








Note

A tout moment vous pouvez activer l'économiseur d'écran en appuyant simultanément sur [], [], [].
Lors de tout appui sur un bouton, ou si la caméra détecte un mouvement, l'économiseur d'écran s'arrête.





Configuration utilisateur

Vous pouvez définir et enregistrer vos paramètres utilisateur, et les restaurer facilement plus tard.

Sauver une configuration





1. Appuyez [] sur la télécommande et choisissez **[Options avancées]**.
2. Choisissez **[Configuration utilisateur]**, puis [] ou [].
3. Sélectionnez **[Sauver une configuration]**, puis [] ou [].
4. Appuyer sur une des sauvegardes, « Utilisateur: x » puis [] ou [].

Rappeler une configuration

1. Sélectionnez **[Rappeler une configuration]**, puis [] ou [].
2. Choisir la configuration des paramètres à rappeler, puis [] ou [] , et valider avec **[Oui]**.

Initialisation

Si le GoVision Pro ne vous semble plus fonctionner correctement, il peut être initialiser aux réglages d'origine usine.

1. Appuyez [] sur la télécommande et choisissez **[Options avancées]**.
2. Choisissez **[Réinitialisation d'origine]**, puis [] ou [].
3. Choisissez **[Oui]**, puis [].

4. **[Initialisation complète]** s'affiche à l'écran une fois l'initialisation effectuée.


**Note**

Lors de la mise en marche du GoVision Pro, le maintien du « bouton futé » sur la caméra jusqu'au démarrage du GoVision Pro, effectue une initialisation .


GoVision Pro, écran d'ordinateur ou de smartphone

Le câble HDMI livré avec le GoVision Pro, permet de connecter l'ordinateur ou le smartphone (avec un adaptateur spécifique au smartphone à se procurer séparément) au GoVision Pro.


1. Relier le câble HDMI à la prise située à l'arrière du GoVision Pro.

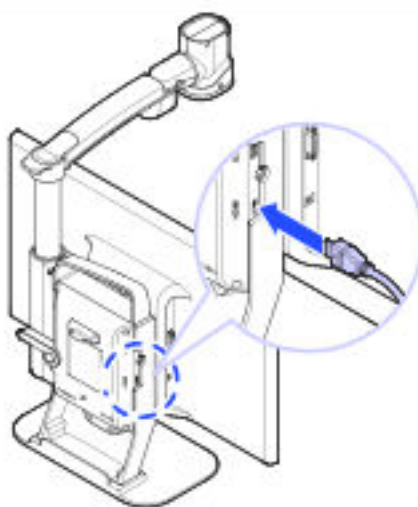

2. R lier l'autre extr mit    votre ordinateur.

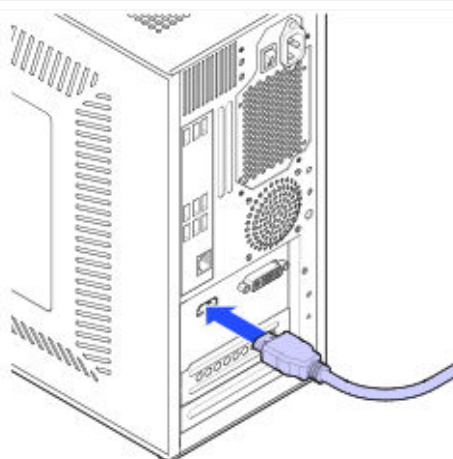

3. Lorsque le GoVision Pro est en marche, appuyez brièvement sur le bouton Marche / Arrêt pour afficher l'image de l'ordinateur.

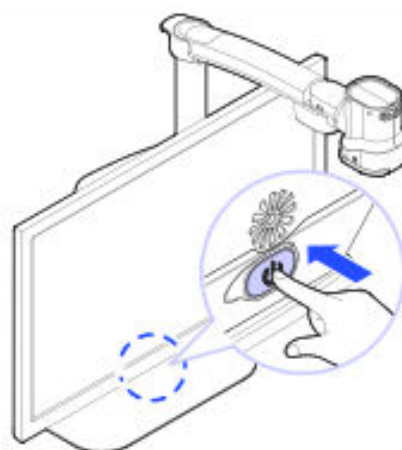

Note

Lorsque le GoVision Pro affiche l'image de l'ordinateur, l'économiseur d'écran du GoVision Pro n'est plus actif.

Note

Pour un ordinateur qui possède une sortie DVI, utilisez un adaptateur DVI / HDMI.


Pour un smartphone utilisez un adaptateur dédié proposé par le fabricant du smartphone.

Maintenance


Transport

L'arrière du GoVision Pro comporte une poignée pour faciliter son transport.


1. Assurez vous que la lentille pour la lecture de document est bien fermée.

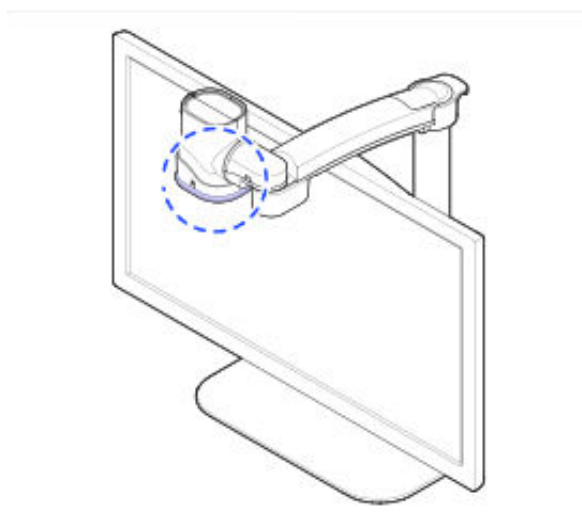


2. Lever le levier rouge de verrouillage du bras de la caméra, puis ranger le bras à l'arrière du GoVision Pro.

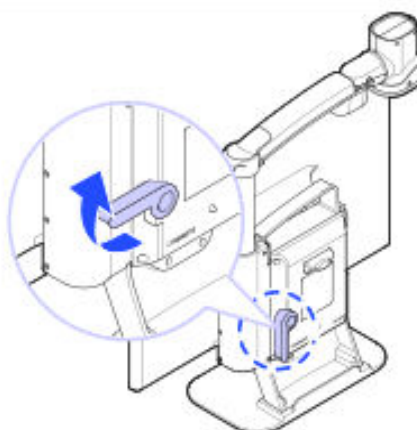

3. Basculer le levier vers le bas

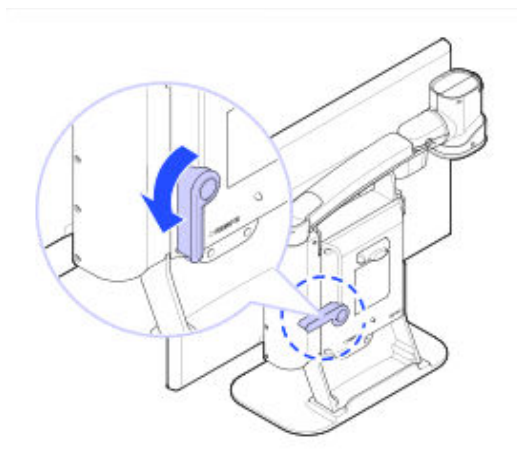


4. Prenez le GoVision Pro par la poignée pour le déplacer.

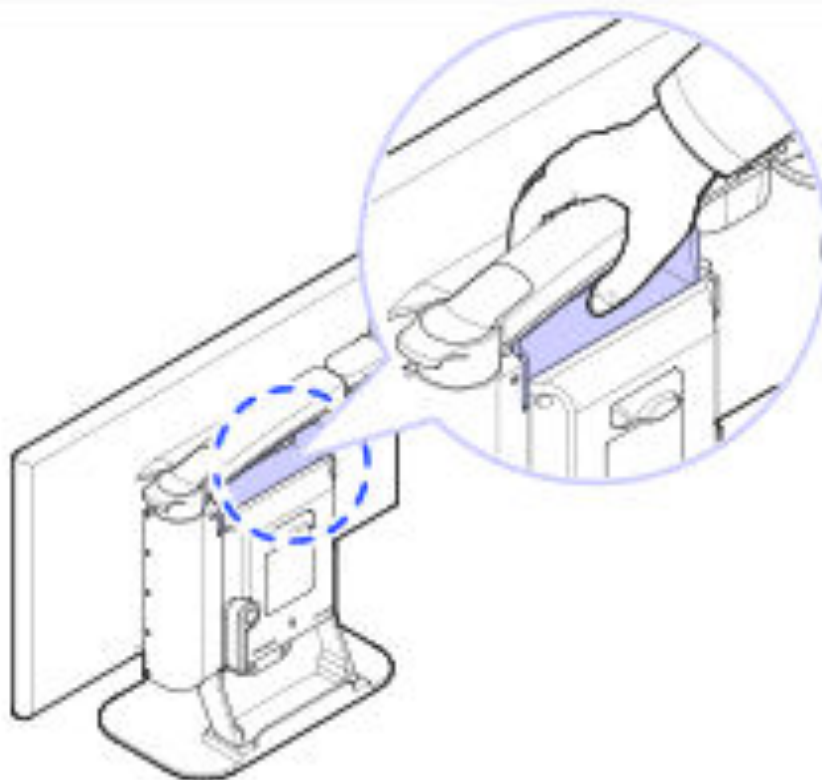

Stockage

Afin de protéger au mieux le GoVision Pro pendant de longues période de non utilisation, stockez le GoVision Pro dans un endroit non sujet à de fortes variations de température.

Nous vous recommandons de stocker le GoVision Pro dans son emballage d'origine.

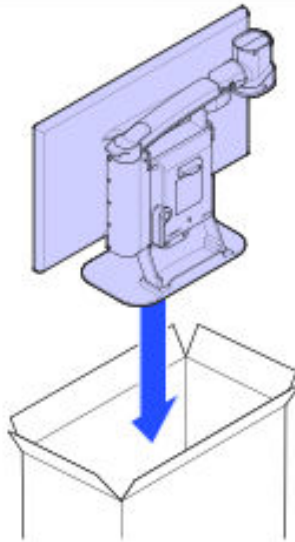

Dépannage



L'écran reste noir

Assurez vous que :

- Le câble d'alimentation secteur est bien relié à une prise murale opérationnelle.
- L'alimentation du GoVision Pro est bien reliée à l'arrière du produit.
- Vous avez appuyez sur le bouton Marche / Arrêt.



Un message 'No Signal' apparaît lorsque vous essayez d'afficher l'image d'un ordinateur ou smartphone

- Assurez vous que le câble HDMI est bien relié.
- Câble correctement relié, relancez votre ordinateur alors que le GoVision Pro est déjà en fonctionnement, puis appuyez alors brièvement sur le bouton Marche / Arrêt du GoVision Pro



Vous ne lisez pas aisément à l'écran

- Si l'image n'est pas nette, changez légèrement le grossissement. Vérifiez que l'option « Autofocus bloqué » n'est pas activée. (pas n'icône de cadenas en haut à droite de l'écran)
- Ajustez le contraste de l'image afin de l'adapter au lieu à la qualité d'impression du document.

Réparations

Réparations sous garantie

Si un défaut de fabrication entraîne pendant l'utilisation du produit une panne, la garantie contractuelle offre alors la réparation gratuite.

Note: Si le défaut de fonctionnement se produit en raison de dommages provoqués par la négligence directe de l'utilisateur ou dus à une catastrophe naturelle telle que l'inondation ou le feu, le client est responsable de tous les coûts de réparation.










Réparations hors garantie

















Note : Les réparations nécessaires en raison des causes suivantes ne sont pas couvertes par la garantie, même si de telles circonstances se produisent au cours de la période de garantie, et ainsi, le client est responsable de tous les coûts relatifs aux réparations.











- Le produit tombe ou est endommagé suite à une chute ou tout autre choc extérieur.
- L'utilisation de pièces de remplacement ou d'accessoires non fournis par VISIOLE ayant entraînés ds dommages.
- Si la panne se produit en raison d'une négligence dans l'observation des mesures de sécurité spécifiques dans le manuel d'instruction de ce produit.
- Si la panne se produit en raison de la catastrophe naturelle (foudre, feu, orage et dégâts des eaux, gaz, dommages de sel, tremblements de terre, etc.)
- Si une panne se produit en raison d'autres actions du client.

Résumé des commandes

Pour démarrer rapidement l'utilisation de votre GoVision Pro, utilisez les touches indiquées ci-dessous pour effectuer les fonctions suivantes:

Num	Fonction	Télécommande	Bouton M/ ou « bouton futé »
1	Allumer	-	appuyez et relâchez le bouton d'alimentation.
2	Éteindre	-	appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 3 secondes.
3	Commutateur PC / vidéo agrandisseur	Appuyez  ,  et  ensemble	appuyez sur le bouton d'alimentation brièvement lorsqu'il est sous tension.
4	LED On / Off	-	appuyez et maintenez la position centrale du « bouton futé ».
5	Zoom +/-	 	appuis courts du « bouton futé » vers la gauche ou la droite.
6	Changer le mode de couleur	Appui court 	appuyez brièvement au centre du « bouton futé ».
7	Basculer de « couleur naturelle » à « mode couleur »	Appuyez et maintenez 	
8	Affiner le mode couleur actif	 + 	

9	Guides	Appui court 	
10	Ajuster position des marqueurs	Appui 	
11	Changer Contraste	Appui court 	
12	Basculer mise au point	Appuyez et maintenez 	
13	Localisateur	Appui   simultanément	
14	Réglage Volume	 	
15	Gel d'image	Appui court 	
16	Sauver image gelée	Appuyez et maintenez 	
17	Lancer OCR	Appui court 	
18	Sauver OCR	Appuyez et maintenez 	
19	Explorateur de fichier	Appuyez  et  simultanément	
20	Explorateur de fichier OCR	Appuyez  et  simultanément	

21	Explorateur de fichiers de document	Appuyez  et  simultanément	
22	Lancer explorateur de fichier	Appui court 	
23	Vérifiez Date / Heure	Appuyez  et  simultanément	
24	Activer le cadre photo	Appuyez  et  simultanément	
25	Démarrer et stopper l'économiseur d'écran	Appuyez  ,  et  simultanément	
26	Reset	Appuyez sur le bouton d'alimentation tout en maintenant le centre du bouton « futé » appuyé, jusqu'à apparition d'un écran blanc	