

Machine à lire ORCAM MyEye



ORCAM MY EYE, UNE CAMÉRA MINIATURE DE LECTURE VOCALE, BASÉE SUR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET FIXÉE SUR LA BRANCHE DE VOS LUNETTES.

ORCAM MyEye lit instantanément le texte d'un livre, d'un smartphone ou de toute autre document. La version PRO, reconnaît les visages, permet l'identification des produits, des billets de banque, des codes-barres, des couleurs, et donne l'heure.

Orcam MyEye est alors une lunette intelligente pour la DMLA, légère et très sophistiquée. Elle est très apprécié des personnes malvoyantes ou dyslexiques éprouvant des difficultés à lire.


- ORCAM MyEye, lit instantanément tous les textes de livres, de journaux, d'écrans de smartphones, d'ordinateurs, etc.
- Se fixe sur une branche de paire de lunettes et est alors très discret.
- Lecture rapide et capture de page complète.
- **ORCAM MyEye PRO** permet la reconnaissance des visage, l'identification des produits avec leur code barre, reconnaît les billets et les couleurs.
- Ce produit est payable en **2, 3, 4 fois** sur notre boutique.

[Vidéos et produits Basse Vision](#)

01 69 19 14 60 - info@visiole.fr



Machine à lire ORCAM MyEye

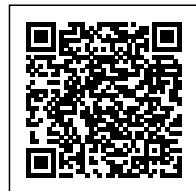

L'OrCam MyEye est une micro caméra révolutionnaire utilisable sur presque toutes les lunettes. En cas de dégénérescence maculaire liée à l'âge, elle les transforme alors en lunette intelligente pour la DMLA.

L'ORCAM MyEye lit les textes

Cette mini caméra lit instantanément le texte d'un livre, d'un smartphone, d'un panneau d'information. Il ne faut qu'une seconde après la prise de vue pour que la lecture vocale du texte commence.

Alimentée par de l'Intelligence Artificielle, la machine à lire ORCAM MyEye, une vraie innovation, est ultra portable et la plus avancée pour les aveugles et les malvoyants souffrant de maladies des yeux comme la [DMLA](#), un [glaucome](#), une [cataracte](#), etc..

Elle combine un OCR précis, un contrôle gestuel intuitif de la main et le vocal.

Une portabilité extrême

La MyEye est discrète, petite, légère et se fixe magnétiquement sur pratiquement n'importe quelle monture de lunettes.

Cette fixation est alors très simple et rapide. Plusieurs fixations sont livrées afin de pouvoir utiliser MyEye sur plusieurs paires de lunettes.

L'ORCAM MyEye ne pèse que 22,5 grammes et est une machine à lire vocale totalement autonome. Elle s'utilise à la maison, au restaurant, en vacances, en classe, au travail, etc.

Fixée sur la branche des lunettes elle est alors toujours disponible et vous gardez une vision claire à travers vos lunettes de vue habituelles.

Facile à utiliser

La My Eye répond intuitivement à des gestes simples de la main effectués devant

[Vidéos et produits Basse Vision](#)

01 69 19 14 60 - info@visiole.fr



Machine à lire ORCAM MyEye

vous. Ainsi, d'un simple geste de la main vous demander l'heure à l'ORCAM ou stopper la lecture en cours.

La surface tactile de la micro caméra, donne accès aux fonction principales, soit par des tapotements, soit par des glissés sur sa surface.

Vous pouvez de plus contrôler vocalement la machine à lire Orcam MyEye comme augmenter le volume, accélérer la lecture, activer certaines fonctions et entrer dans le menu.

La fonctionnalité de Lecture intelligente facilite la lecture de documents complexes.

Ainsi, elle permet de trouver à l'intérieur du texte, les noms, les montants, les dates, des numéros de téléphones et de faire commencer la lecture à un mot donné.

Sans fil

L'écoute à lieu via le mini haut parleur intégré à l'ORCAM My Eye . Grâce à des écouteurs Bluetooth ou des appareils auditifs (non fournis) , l'écoute est alors sans fil et discrète.

La connexion WIFI, paramétrée une seule fois, donne accès aux mises à jours automatique lorsque My Eye est relié sur son chargeur.

A noter qu'aucune connexion à Internet ou à un smartphone n'est nécessaire durant le fonctionnement normal.

ORCAM MyEye PRO

La version PRO de l'ORCAM MyEye, encore plus innovante, comporte des fonctions complémentaires comme:

- La reconnaissance et l'annonce vocale des visages de vos proches et relations que vous apprenez à MyEye selon vos besoins.
- La lecture des codes barres des produits de la vie courante et énonce alors leurs noms et caractéristiques
- La reconnaissances de vos objets personnels (150 maximum) après un simple apprentissage.
- La lecture des billets de banques
- La détection des couleurs de toutes surfaces, documents, vêtements,
- La fonction de lecture intelligente et d'orientation

[Vidéos et produits Basse Vision](#)

 01 69 19 14 60 - info@visiole.fr

Machine à lire ORCAM MyEye



Caméra avec une résolution vidéo de 13 Mégapixels.

Haut parleur intégré

Dimensions et poids : 76 x 21 x 14,9 mm pour 2,5 g

Batterie de 3,7V DC, 320 mAH.

Autonomie de 1 h 30 et recharge en 45 minutes maximum.

Contenu du coffret:

1 caméra MyEye 2.0 Smart ou Pro

1 paire de lunettes neutre, sans correction

2 kit de montage magnétique à utiliser sur vos propres montures

1 chargeur et câble USB vers micro USB.

1 dragonne tour de cou.

1 étui de protection.

1 micro fibre de nettoyage

Vidéos et produits Basse Vision

01 69 19 14 60 - info@visiole.fr

