

# ORCAM Pack Extend




LE ORCAM PACK EXTEND EST UNE MACHINE À LIRE DE BUREAU ET UNE CAMÉRA MINIATURE DE LECTURE. UTILISABLE EN TOUT LIEU ET D'UNE SIMPLICITÉ EXEMPLAIRE.

**Cet ensemble convient aux personnes déficientes visuelles, dyslexiques, éprouvant des difficultés à lire et qui souhaitent lire aussi bien de façon nomade que assise devant un bureau. L'utilisation en machine à lire posée est intuitive et performante.**

L' ORCAM Pack Extend offre un ensemble tout en un, constitué autour du lecteur vocal ORCAM Read Smart :

- Un Orcam Read Smart
- Un support de lecture Orcam
- Une enceinte portable, bluetooth
- Une prise en main des fonctions, à distance ou dans notre show room
- Une assistance téléphonique illimitée pendant 1 an

Ce produit est payable en **2, 3, 4 fois** .

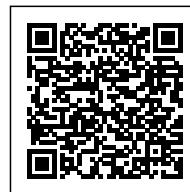

Avec l' ORCAM Pack Extend, profitez d'une machine à lire multi usage, intuitive et



**Vidéos et produits Basse Vision**

**01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)**

# ORCAM Pack Extend

simple. Elle est parfaitement adaptée aux personnes âgées souffrants de DMLA, aussi bien qu'aux actifs malvoyants désireux de lire en tout lieu.

L' ORCAM Pack Extend bénéficie de la rapidité de reconnaissance et de la lecture de qualité de l'ORCAM READ Smart. A cela s'ajoute le confort du support de lecture permettant ainsi l'utilisation sans tenir l'ORCAM à la main.

## **l' ORCAM Pack Extend transforme la façon de lire**

L'OrCam Read Smart est une mini caméra de lecture assistée de l'intelligence artificielle, révolutionnaire et unique en son genre. Elle reconnaît le texte (courrier, journaux, magazine) instantanément et le lit vocalement à votre rythme.

Tenu à la main, ORCAM READ vous permet de lire des paragraphes d'articles de revue, des pages de livres ainsi que des notices et boîtes de médicaments.

Posé en haut du support de lecture, la caméra miniature ORCAM READ se transforme alors en réelle machine à lire de bureau.

La lecture de page entière de magazine est alors aisée en lui demandant par un simple "ORCAM lit tout".

Grâce à la reconnaissance de mouvement, ORCAM détecte votre doigt qui pointe un paragraphe et commence alors la lecture de ce dernier. De plus, d'un simple geste de votre main ouverte au dessus du document, la lecture s'arrête.

Avec l' ORCAM Pack Extend, vous découvrez une nouvelle façon de lire, plus intuitive, plus simple, plus efficace.

## **Le support de lecture de l' ORCAM Pack Extend**

Avec ce support de lecture, l'ORCAM READ Smart devient une machine à lire de bureau ultra simple d'utilisation.

Ce support, léger, stable et discret se transporte aisément si besoin de pièce en pièce.

A l'extrémité supérieur du bras du support de lecture, l'ORCAM se glisse dans un petit support et est alors dirigé vers le bas, en regard du document à lire.

Le document est simplement positionné entre les pieds de la base du support, devant l'utilisateur. La lecture peut alors commencer.

## **La lecture intuitive**

Commencez à lire tout de suite en utilisant votre doigt.

En effet, en désignant avec votre doigt le texte à lire, puis en retirant votre main de



**Vidéos et produits Basse Vision**

**01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)**

# ORCAM Pack Extend

dessus du document, ORCAM lit alors le paragraphe montré. La lecture continue jusqu'à la fin du texte ou si vous avancez votre main ouverte au dessus du document, stoppant alors la lecture.

Dites "Orcam lit tout" et la lecture de l'ensemble du document commence. Ainsi les deux pages d'un roman, un courrier sur une page A4, une page de magazine, sont lues en commençant en par le texte situé en haut à gauche. Ensuite l'intelligence artificielle d' ORCAM enchaîne les paragraphes dans le meilleur ordre possible.

## Une écoute claire pour tous

Le son est transmis naturellement via le **haut-parleur intégré** à l' ORCAM.

Les deux boutons en relief, **Plus et Moins** sur le devant de l'ORCAM permettent l'ajustement du volume sonore. Ce dernier peut également être ajusté par de simple **commandes vocales comme "augmente le volume" ou "diminue le volume"**.

Pour les **personnes équipées d'appareils auditifs**, après appairage en bluetooth avec l'ORCAM, le son est alors transmis directement aux oreilles. Le haut parleur intégré à l'ORCAM restant alors muet.

Pour avoir un **son de lecture plus fort, plus profond, plus limpide**, la mini **enceinte bluetooth** comprise dans l' ORCAM Pack Extend devient la solution optimum. Avec plus de 5 W de puissance efficaces, la lecture est facilité dans les environnements bruyants, ou pour les personnes avec une baisse de l'acuité auditive.

## Le service inclu dans l' ORCAM Pack Extend

Afin de vous assurer une prise en main efficace de cette machine à lire, et la sérénité pendant un an, nous intégrons à l' ORCAM Pack Extend, des services exclusifs :

- Une session de prise en main, formation à l'installation et à l'utilisation de l'ORCAM dans les différents modes de lecture possible
- Une assistance téléphonique illimitée pendant 1 an pour répondre à toutes vos questions sur l'utilisation.

## Contenu de l' ORCAM Pack Extend

- Un Orcam Read Smart
- Un support de lecture Orcam
- Une enceinte portable, bluetooth
- Une prise en main des fonctions, à distance ou dans notre show room



[Vidéos et produits Basse Vision](#)

01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)

# ORCAM Pack Extend

- Une assistance téléphonique illimitée pendant 1 an



## **Orcam Read Smart :**

Caméra avec 13 MPixels

Haut parleur intégré

Prise pour écouteurs

Connectivité Bluetooth pour oreillette ou casque bluetooth ou enceinte bluetooth

Poids : 44,5 gr

Taille : 122 mm x 25 mm x 13 mm

Alimentation : 3,8 V avec batterie de 320 mAh, autonomie : 4h

## **Support pour l'ORCAM Read:**

Dimension en utilisation : Base de 25 cm x 24 cm, Hauteur : 45 cm

Poids : 580 g

## **Enceinte Bluetooth (modèle variable selon livraison)**

Portable, étanche

Puissance moyenne 5W

Autonome, avec batterie intégrée rechargeable

Prise de charge USB C

Cable de charge USB C et chargeur 5 V compris

# ORCAM Pack Extend

- Tout en un dans le Pack pour lire agréablement tout document et en tout lieu
- Lecture intelligente simplement en pointant du doigt le texte à lire.
- Lecture d'une page en entier en disant " OrCam lit tout" . Contrairement à tous les autres appareils où vous devez numériser mot à mot, OrCam Read capture une page entière en une seule fois.
- Commande par la voix pour les fonctions principales.
- L'ORCAM READ reste utilisable seul , tenu à la main, en pointant et cliquant simplement. D'une simple pression sur un bouton, OrCam Read active un laser pour indiquer où commencer la lecture sur n'importe quel texte ou écran imprimé.
- L'écoute à tout moment : par le petit haut-parleur intégré à l'ORCAM Read, ou par des écouteurs filaires, ou par des appareils auditifs compatibles, ou par l'enceinte bluetooth livrée dans le pack.



Vidéos et produits Basse Vision

01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)