


# ORCAM READ , stylo de lecture



ORCAM READ: STYLO DE LECTURE VOCAL RÉVOLUTIONNAIRE QUI TRANSFORME INSTANTANÉMENT TOUT TEXTE EN PAROLES.

**Que vous soyez un étudiant confrontée à la dyslexie, ou un sénior faisant face à une maladie des yeux comme la DMLA, ORCAM Read est votre machine à lire miniature pour une lecture facile, accessible et efficace.**

- Une mini-caméra de la taille d'un gros stylo, léger, ultra transportable
- Très facile d'utilisation, soit tenu à la main au dessus du document, soit posé sur son support
- Lecture instantané de tous les textes dactylographiés

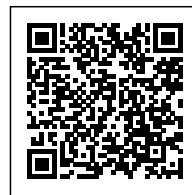

L'OrCam Read n'est pas seulement une mini caméra de la taille d'un stylo de lecture vocale, c'est un allié précieux pour les séniors, les personnes atteintes de DMLA et les dyslexiques. Son design en forme de stylo est idéal pour le tenir confortablement, le rendant pratique pour un usage quotidien.

## **ORCAM Read, un stylo de lecture intuitif**

Avec l'OrCam Read, lire des textes devient un jeu d'enfant. Sa **simplicité d'utilisation** et ses 3 boutons vous permettent de **lire instantanément** presque tous les textes dactylographiés.

**Vidéos et produits Basse Vision**

**01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)**



# ORCAM READ , stylo de lecture

L'OrCam se tient dans la main à la manière d'un stylo, la main à environ 25 cm au dessus du texte.

Une simple pression sur le bouton situé sous l'index, projète une flèche rouge sur le document, qui désigne le bloc de texte à lire. Au relâchement du bouton, l'image est saisie et la lecture débute avec une voix et une vitesse à votre convenance.

Que ce soit pour **lire le journal du matin, un roman passionnant**, ou même les **notices de médicaments**, ce stylo de lecture vocale vous suit partout. Son **poids plume de 44g** et sa connectivité Bluetooth en font l'outil idéal pour une utilisation nomade.

La tolérance à la distance et à l'inclinaison vous permet de lire dans différentes situations (assis dans un canapé, dans le lit, debout dans des magasins, etc.) sans effort.

## **Le mode support pour une utilisation encore plus facile**

Si vous préférez **poser l'OrCam Read pour lire**, le mode support rend les choses plus simples.

Il suffit de **pointer du doigt le texte** sur le document, et le stylo de lecture s'en charge. Idéal pour les personnes âgées ou celles ayant des difficultés de préhension.

Vous pouvez lire des recettes de cuisine, des romans, ou des factures avec une grande facilité. Tout cela devient plus simple et plus agréable avec l'OrCam Read sur le support.

## **Technologie de pointe de l'ORCAM Read**

Doté d'une technologie d'intelligence artificielle avant-gardiste, l'**ORCAM Read capture et lit les textes avec une rapidité et une précision exceptionnelles**. Sa caméra de 13 MP garantit une reconnaissance textuelle impeccable sur divers supports, des livres aux écrans.

L'OrCam Read utilise un algorithme sophistiqué d'OCR, ce qui signifie qu'il peut lire des textes complexes avec fluidité et de manière naturelle.

Avec une capacité de **détection automatique de la langue** et des **commandes vocales intelligentes**, l'ORCAM Read représente le summum de l'innovation technologique dans le domaine de l'aide à la lecture.

## **Fonctionnalités innovantes de l'ORCAM Read**

L'OrCam Read offre un **guidage laser pour une capture précise**, un éclairage LED

**[Vidéos et produits Basse Vision](#)**

**01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)**



# ORCAM READ , stylo de lecture

intégré pour une utilisation dans des environnements sombres, et des commandes vocales pour rendre l'interaction plus naturelle. Que ce soit pour lire des **documents**, des **écrans** ou des **étiquettes de produits**, cet outil s'adapte à vos besoins.

Sa capacité à reconnaître et lire automatiquement les textes en caractères d'imprimerie, offre une liberté sans précédent pour lire journaux, livres, menus, et **même des textes sur les écrans de smartphone ou de tablettes**.

Il peut même **lire des codes-barres** et offre des raccourcis personnalisables pour une utilisation plus rapide et efficace.

Avec ses fonctionnalités intelligentes, vous pouvez lire des numéros de téléphone, des montants sur des factures, ou des titres de livres d'une simple commande vocale

## Accessibilité et inclusion

Conçu pour aider une variété d'utilisateurs, **de la déficience visuelle à la dyslexie**, l'ORCAM Read se révèle être un outil indispensable dans la vie quotidienne.

Imaginez Julie, une jeune femme malvoyante, parcourant sereinement un magazine dans un café, ou encore Maxime, étudiant dyslexique, gagnant en autonomie dans ses études grâce à la facilité de lecture des textes académiques.

Avec une autonomie robuste et une gamme de langues disponibles, l'ORCAM Read assure une expérience de lecture inclusive pour tous, du professionnel surchargé cherchant à optimiser son temps, au senior désireux de redécouvrir le plaisir de la lecture.

## ORCAM Read, stylo lecteur adapté aux besoins spécifiques

L'OrCam Read est conçu pour répondre aux besoins des séniors, des personnes atteintes de **DMLA**, et des **dyslexiques**.

Son design léger et compact permet de l'emporter partout, que ce soit dans un sac à main ou une poche.

Il peut lire des documents dactylographiés et des écrans de téléphones ou tablettes, offrant une grande polyvalence pour différentes tâches quotidiennes.

Le volume réglable et la voix féminine ou masculine assurent une expérience personnalisée pour chaque utilisateur

**Vidéos et produits Basse Vision**

**01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)**



# ORCAM READ , stylo de lecture



## Caractéristiques de l'ORCAM Read

- **Caméra:** 13 MP
- **Types de voix:** Féminine et Masculine
- **Guidage laser:** Modes fenêtre et spot
- **Poids:** 44g
- **Dimensions:** 122 x 25 x 13 mm
- **Connectivité:** Bluetooth, Prise Jack
- **Lumière LED:** Intégrée pour environnements sombres
- **Autonomie:** 4 heures
- **Batterie:** 320mAh, rechargeable via USB
- **Langues:** Français, Anglais, Allemand
- **Usage:** Pour personnes déficientes visuelles, dyslexiques
- **Technologie:** Intelligence Artificielle
- **Garantie:** 2 ans

Proposé d'origine en français avec voix françaises, anglaise et allemande

D'autres langues sont disponibles comme , l'espagnol, le portugais, l'italien, le hollandais et allemand.

## Les points forts de l'ORCAM Read

### Utilisation simplifiée

- **Pointez et cliquez:** Un appareil intuitif qui se contrôle facilement avec un simple bouton
- **Conversion instantanée en audio:** Tous les textes sont rapidement transformés en audio, écoutables via le haut-parleur intégré ou un dispositif Bluetooth.

### Guidage laser innovant

- **Précision de capture:** Choisissez de lire un bloc de texte désigné par le pointeur

**Vidéos et produits Basse Vision**

**01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)**



# ORCAM READ , stylo de lecture

laser, ou le texte contenu dans le cadre lumineux du laser.

- **Pleine page / Capture plein écran:** Efficacité maximale pour la lecture de documents complets.
- **Précision améliorée:** Repérez et lisez le texte souhaité avec facilité grâce à notre technologie laser.

## Technologie avancée

- **Reconnaissance de geste de la main :** l'Orcam est posé sur son support, pointez simplement du doigt le texte et la lecture commence.
- **Conversion audio instantanée:** Textes transformés rapidement en audio, via le haut-parleur intégré ou un dispositif Bluetooth.
- **Bluetooth activé:** Connectez-vous à un casque ou à un haut-parleur pour une écoute personnalisée.
- **Activation vocale :** Activez et commandez l'appareil simplement par la voix. Dites "Hey OrCam" pour une interaction mains-libres.

## Lecture intelligente

- **Large gamme de textes:** Fonctionne avec journaux, livres, menus, panneaux, étiquettes de produits et écrans.
- **Commandes flexibles:** Demandez "Lire les prix" ou commencez par une section spécifique.

## Personnalisation et mobilité

- **Lisez partout:** Idéal à la maison, en shopping, au restaurant, ou partout où la journée vous mène.
- **Rythmes de lecture réglables:** Incluant jusqu'à 300 mots par minute pour une lecture rapide.
- **Portable:** Emmenez l'ORCAM Read où que vous alliez pour une lecture intelligente en déplacement.

## Lumière LED intégrée

- **Lecture en toute situation:** Une lumière LED pour faciliter la lecture dans les environnements peu éclairés.

## L'ORCAM Read est-il facile à utiliser ?

Oui, il est conçu pour être simple et intuitif, avec des commandes physiques claires et un design ergonomique.

## Peut-il lire différents types de texte ?

Il peut lire des magazines, des journaux, des notices de médicaments, des étiquettes de prix, et même des SMS sur votre téléphone.

**Vidéos et produits Basse Vision**

**01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)**



# ORCAM READ , stylo de lecture

## **Le mode support est-il inclus ?**

Absolument, le mode support est un paramétrage que nous activons avant la livraison. Il vous permet de poser le stylo lecteur sur un support pour une utilisation mains libres.

## **L'OrCam Read est-il portable ?**

Oui, il est léger et facile à transporter, parfait pour les séniors et les personnes actives.

## **Quelles sont les caractéristiques principales ?**

L'ORCAM Read a une reconnaissance OCR rapide, un volume réglable, et des commandes vocales pour une utilisation intuitive.

**Vidéos et produits Basse Vision**

**01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)**

