


# Loupe électronique MANO 6



UNE LOUPE ÉLECTRONIQUE AVEC POIGNÉE, ÉCRAN TACTILE ET DES BOUTONS BIEN VISIBLES.

**La loupe électronique MANO 6 est très agréable tenue à la main ou posée sur le document grâce à son pied intégré. La caméra et l'écran Full HD procurent des images contrastées optimisées pour la DMLA. La mise au point est rapide et l'écran d'excellente qualité procure un confort de lecture accru.**

- Ecran large de 14 cm, **tactile**, grossissement de 1x à 35x
- Poignée ergonomique, servant de support de lecture
- Images Full HD, couleurs vives, très qualitatives
- Autonomie 3,5 h avec recharge rapide

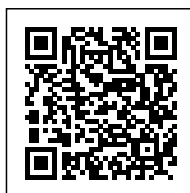

La MANO 6 est votre nouvelle loupe de lecture, dotée d'un écran tactile haute résolution et de quatre boutons tactiles pour une utilisation qui vous est simplifiée et agréable.

Conçue spécialement pour vous, la MANO 6 est l'alliée idéale des personnes atteintes de DMLA ou d'autres [maladies de la vue.](#)



**[Vidéos et produits Basse Vision](#)**

**01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)**

# Loupe électronique MANO 6

## MANO 6, une utilisation intuitive

La loupe électronique MANO 6, avec ses quatre boutons grands et visibles et son écran tactile de 14 cm, est intuitivement facile à utiliser, vous offrant une indépendance accrue.

Ajustez le grossissement facilement, soit en pressant les boutons PLUS ou MOINS, soit en utilisant simplement les gestes intuitifs de zoom sur l'écran tactile. Le grossissement est continu et possible de 1x à 35x.

Vous pouvez "geler" l'image à tout moment, ce qui est parfait pour examiner de près une étiquette placée en hauteur dans un rayonnage. Sauvegardez l'image dans votre galerie interne pour la consulter ultérieurement avec les options de grossissement et de contraste selon votre convenance. Transférez également vos images sur une carte micro SD pour un partage et une conservation faciles.

Profitez des fonctionnalités supplémentaires telles que la ligne de guidage, le fenêtrage, l'autofocus, et l'éclairage LED, activables via l'écran tactile ou des combinaisons de touches, conçues pour rendre votre expérience plus confortable.

## L'écran large de la MANO 6 pour plus de confort de lecture

Grâce à son écran large de 6 pouces (14 cm), la loupe électronique MANO 6 affiche plus de texte à la même taille de grossissement, rendant la lecture plus fluide et moins fatigante. **La lecture est alors plus fluide même avec un fort grossissement.**

Son écran tactile de 14 cm vous offre une image vive et contrastée, facile à lire sous tous les éclairages grâce à sa dalle mate.

Toutes les fonctions de base comme le grossissement, le choix des couleurs, le gel de l'image, sont bien sûr accessibles directement par les boutons situés à gauche et à droite de l'écran.

## Une poignée vraiment ergonomique

La loupe électronique **MANO 6 s'allume automatiquement** lorsque vous déployez la poignée / support ce qui facilite grandement son utilisation.. Vous pouvez maintenant placer la loupe sur votre document, l'écran de trouvant alors incliné à 45 degrés, et commencer à lire dans un angle de lecture ergonomique.

La poignée de la MANO 6 vous permet de la tenir comme une loupe classique, pour plus de flexibilité. La poignée rotative de la loupe MANO 6 est conçue pour s'adapter à différentes positions, idéale pour les utilisateurs droitiers.



**Vidéos et produits Basse Vision**

**01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)**

# Loupe électronique MANO 6

Grâce à sa poignée repliable, vous pouvez tenir la MANO 6 comme un smartphone, rendant son utilisation encore plus pratique.

## Les mémos vocaux pour les photos

Enregistrez des mémos vocaux avec vos photos pour une aide mnémotechnique personnalisée, rendant chaque image plus significative.

Vous enregistrez avec votre propre voix, un nom ou un message de description de l'image. Lorsque vous retournez dans la galerie, l'image choisie avec le mémo vocal énonce alors à haute voix ce que vous avez enregistré.

## La MANO 6 toujours avec vous

Légère et compacte, la MANO 6 vous accompagne partout, parfaite pour les voyages ou les déplacements.

Légère et compact, elle est facile à emporter dans vos déplacements. Une pochette rembourrée protège la loupe de lecture MANO 6 contre les dommages dans votre sac.

Optez pour la loupe électronique MANO 6, supérieure aux loupes optiques traditionnelles grâce à sa qualité d'image exceptionnelle et sa facilité d'utilisation, vous offrant une lecture claire et aisée sur tout document.



## CARACTÉRISTIQUE DE LA MANO 6

- Ecran 6 " ( image de 14 cm), tactile, mat, format large  
Résolution Full HD, 1920 x 1080 pixels
- Caméra permettant la vision de près, la lecture  
Grossissement : de 1x à 35 x  
Mode couleurs naturelles et fort contraste
- Poignée rotative, repliable  
Support incliné de l'écran



[Vidéos et produits Basse Vision](#)

01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)

# Loupe électronique MANO 6

- Seulement 4 boutons bien visibles
- Gel d'image et mémorisation en mémoire interne (2GB)  
Transfert sur carte Micro SD possible
- Mise au point automatique  
Lignage, Fenêtrage  
Réglage de la luminosité  
Interface via boutons et écran tactile
- Alimentation sur batterie  
Autonomie jusqu'à 3h  
Recharge en 2,5 h
- Dimensions : 16 cm x 9,1 cm x 2 cm  
Poids : 274 gr

## LES VIDÉOS SUR LA MANO 6

Retrouvez plusieurs vidéos sur la loupe électronique MANO 6 sur notre chaine [Youtube](#).

### La prise en main de la loupe MANO 6

Depuis l'ouverture de la boîte jusqu'à la première lecture de documents.

### L'ajustement de la luminosité de l'écran et des LED

La luminosité de l'écran est ajustable comme sur un écran d'ordinateur. De même la puissance des 2 LED d'éclairage du document est ajustable. Cela permet d'éteindre les LED lors de la lecture d'écran de smartphones par exemple, ou de diminuer l'intensité des LED lors de la lecture de magazines sur papier glacé.

## LES POINTS FORTS DE LA MANO 6

- Loupe destinée à la **lecture de tous les documents**
- Loupe électronique facile de prise en main
- **Seulement 4 boutons** bien visibles pour les fonctions essentielles (grossissement, contraste, gel d'image)
- Adaptée pour les séniors atteints de DMLA
- Remplace avantageusement les meilleurs loupes en verre

### Qu'est-ce que la loupe électronique MANO 6 peut apporter à une personne atteinte de DMLA ?

La MANO 6 aide à améliorer significativement la qualité de vie des personnes atteintes de DMLA en fournissant un **grossissement adaptable de 1x à 35x**, un écran tactile facile à utiliser et des fonctionnalités comme le gel d'image pour une lecture confortable de détails fins.



[Vidéos et produits Basse Vision](#)

01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)

# Loupe électronique MANO 6

## **Comment la loupe MANO 6 facilite-t-elle la lecture pour les malvoyants ?**

Grâce à son **écran large de 14 cm qui affiche plus de texte** avec un fort grossissement, la MANO 6 rend la lecture fluide et moins fatigante. De plus, les réglages comme **le contraste élevé** et les différentes options de couleur **aident à voir les textes plus clairement**.

## **La MANO 6 est-elle portable et facile à transporter ?**

Oui, la MANO 6 est légère et compacte, ce qui la rend facile à emporter partout. Elle vient avec une pochette rembourrée pour la protéger, rendant le transport sécurisé et pratique.

## **Peut-on enregistrer des images dans la MANO 6 ?**

Absolument, la MANO 6 permet non seulement de sauvegarder des images dans une galerie interne mais aussi d'y associer des mémos vocaux pour une meilleure mémorisation et référence ultérieure.



Vidéos et produits Basse Vision

01 69 19 14 60 - [info@visiole.fr](mailto:info@visiole.fr)