


Clip Lunettes Loupe



UNE SURLUNETTE À CLIPSER SUR VOTRE PAIRE DE LUNETTES DE VUE QUI DEVIENT ALORS UNE LUNETTE LOUPE.

Ce clip de lunette s'abaisse et se relève très facilement pour passer de votre correction optique habituelle au mode loupe: lecture ponctuelle, travaux manuels, signature de chèques, etc.

- Se clipse sur toutes les paires de lunettes de vue et lunettes de soleil
- Le Clip ajoute un grossissement à vos lunettes de 1,4x , 1,7x ou 2x (selon modèle)
- Apporte un confort de vision pour un faible besoin de grossissement
- Solution très légère

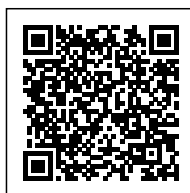

Le clip lunettes loupe renforce la correction de vos lunettes de vue et procure alors un grossissement additionnel léger. Il convient aux personnes désirant effectuer un travail minutieux avec les doigts à environ 25 cm devant les yeux.

Cette surlunette loupe est un accessoire indispensable pour toute personne ayant un besoin de **grossissement "faible"** pour les activités du quotidien. Elle convient parfaitement au presbytes.

3 grossissements au choix

Proposée en 3 versions, +2, +3 et +4 Dioptries, le clip lunette loupe ajoute un

Vidéos et produits Basse Vision

01 69 19 14 60 - info@visiole.fr



Clip Lunettes Loupe

grossissement respectivement de 1,4 X 1,7X et 2X. Cette loupe à clipser sur les lunettes classiques de vue et sur lunettes de soleil, s'adapte aux besoins quotidiens.

Les grossissements "s'ajoutent" à la correction optique déjà effectuée par les lunettes de vue fournies par [votre opticiens sur prescription de l'ophtalmologiste](#). Les corrections d'astigmatismes sont alors toujours présentes.

L'utilisateur augmente ses possibilités de regarder des détails pour la lecture ou les travaux manuels de précision.

Clip loupe pour tout type de lunettes

Cette loupe à clipser sur lunettes est compatible avec toutes les paires de lunettes. Qu'elles soient de vue ou de soleil, le clip se pince sur la monture de la paire de lunette.

De plus la loupe est légère, 15 g. Elle peut ainsi être portée en permanence sur des lunettes sans occasionner de gêne.

A tout moment, les lentilles peuvent être relevées, sans retirer le clip des lunettes, afin de retrouver un usage classique de vos lunettes.

Utilisation du clip lunettes loupe

- Prenez vos lunettes et clipsez au centre de la monture, au dessus du nez, le clip lunettes.
- Relevez la loupe vers le haut pour retrouver l'usage classique de vos lunettes de vue.
- **Ajustez la position du livre, de l'objet ou de vos doigts à une distance recommandée, dépendante du grossissement choisi:**
 - Pour grossissement de 1,4 X , la distance est de 50 cm
 - Pour 1,7X, la distance document - lunettes est de 33 cm
 - Pour 2X , la distance recommandée est de 25 cm

Avec l'âge et la presbytie, la couture, le modélisme, la peinture, la philatélie, le travail de précision, sont autant d'activités qui nécessitent souvent de regarder des détails.

Ce clip lunette loupe est alors l'accessoire très pratique dans beaucoup de situations de la vie courante.

[Vidéos et produits Basse Vision](#)

01 69 19 14 60 - info@visiole.fr



Clip Lunettes Loupe



CARACTÉRISTIQUES DU CLIP LUNETTES LOUPE

- Clip loupe lunettes proposé en 3 puissances : +2 , +3 ou +4 Dioptries
- Correspond à des grossissements : 1,4 X 1,7X et 2X
- Le clip se pince facilement sur la monture
- Articulé pour être en position abaissée ou relevée
- S'utilise en complément des lunettes de vue
- Vision binoculaires pour une meilleur vision
- Fixation par clip sur toute paire de lunettes
- Largeur totale : 125 mm
- Largeur des verres : 55 mm et hauteur 36 mm
- Poids : 14 g

Vidéos et produits Basse Vision

01 69 19 14 60 - info@visiole.fr

