


Lunettes Loupe FOCUS



LUNETTES LOUPES POUR LA LECTURE, LES TRAVAUX MANUELS, LA COUTURE, LA PHILATÉLIE...

Avec les lunettes loupes Focus, les petits travaux manuels, la consultations de boîtes de médicaments, notices, signatures, sont plus faciles avec ces loupes posées sur le nez, plutôt qu'avec une loupe tenue à la main.

- Grossissement modéré de X 2,5
- Réglage de dioptrie indépendant pour chaque œil
- Lunettes loupes légères

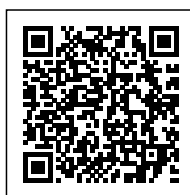

Les lunettes loupe Focus sont parfaites pour vos travaux manuels comme la couture, le bricolage, la philatélie, ou la peinture. Elles sont également idéales pour lire des livres, consulter votre téléphone ou regarder l'heure sur votre montre.

Quand utiliser les lunettes loupe FOCUS ?

Ces lunettes sont conçues pour des **distances de lecture et de travail entre 20 cm à 30 cm.**

Vous les trouverez particulièrement utiles pour la lecture, le bricolage, la couture, la peinture et tous les travaux de précision qui nécessitent une vision claire à courte distance.

Les lunettes loupe Focus sont aussi très pratiques dans un bureau, en classe ou en

Vidéos et produits Basse Vision

01 69 19 14 60 - info@visiole.fr



Lunettes Loupe FOCUS

bibliothèque pour consulter des documents. Leur design léger et ajustable les rend confortables à porter, même pendant de longues périodes.

Principe des lunettes loupes

Chaque branche des lunettes a une molette blanche pour **régler la dioptrie de -4 à +4**, indépendamment pour chaque œil. Il y a aussi une molette noire qui permet de verrouiller le réglage pour plus de stabilité.

Après une petite période d'adaptation, généralement de quelques heures, la plupart des utilisateurs trouvent ces lunettes loupe FOCUS très confortables.

Un confort visuel adapté à vos besoins

Les lunettes loupe Focus peuvent remplacer vos lunettes de vue, ce qui est idéal pour les personnes malvoyantes ou atteintes de presbytie qui ont besoin d'un peu plus de précision pour leurs activités quotidiennes.

Elles offrent un confort visuel exceptionnel et vous permettent de garder les mains libres, contrairement à une loupe à main.

Une loupe sur le nez !

Les [lunettes loupes](#) ont l'avantage par rapport à des [loupes optique à main](#), d'être portées sur le nez. Les deux mains restent libres pour tenir un livre ou manipuler un objet.

Note : dans le cas de lunette de vue avec des corrections multiples ou spécifiques, le port des lunettes loupe peut ne pas convenir.

Découvrez nos autres lunettes loupe

Pour regarder la télévision ou des écrans à distance, vous pouvez essayer les [LUNETTES LOUPE MAX TV](#) ou les [LUNETTES MAXI TV Plus](#), conçues pour des distances supérieures à 2 mètres.

CARACTÉRISTIQUES DES LUNETTES LOUPES FOCUS

- Grossissement : environ 2,5 x
- Distance d'utilisation entre 25 et 45 cm
- Lentille en acrylique et monture en ABS
- Distance inter-pupillaire supportée de 60 à 68 mm
- Ajustage des dioptries ± 4 dioptries par un réglage indépendant droite et gauche,
- La correction des cylindres n'est pas possible.

[Vidéos et produits Basse Vision](#)

01 69 19 14 60 - info@visiole.fr



Lunettes Loupe FOCUS

- Fournie avec un étui rigide.
- Poids : 70 grammes

Les lunettes loupes FOCUS sont elles adaptées pour la lecture d'écrans d'ordinateur?

Oui , les lunettes peuvent être utilisées pour regarder un écran d'ordinateur si vous êtes assez proche.

En effet les lunettes loupes FOCUS proposent un grossissement 2X, et comme toute loupe optique nécessite d'avoir une distance entre les verres et l'écran de 25 cm dans ce cas.

A savoir: plus le grossissement optique est important , plus la distance sera réduite.

Les lunettes loupe Focus conviennent-elles pour les travaux manuels ?

Les lunettes loupe sont idéales pour les travaux manuels comme la couture, le bricolage, la philatélie ou la peinture. Elles offrent un grossissement adapté pour voir les détails à des distances courtes.

Les lunettes loupe Focus peuvent-elles remplacer mes lunettes de vue pour la lecture

Oui dans le sens ou vous n'utilisez pas actuellement vos lunettes pour "lire" car elles ne grossissent pas. Les lunettes loupe Focus sont utilisées à la place de vos lunettes de vue pour lire des livres, consulter votre téléphone ou travailler sur des tâches nécessitant une vision de près.

Comment ajuster les lunettes pour obtenir le meilleur résultat ?

Chaque branche des lunettes loupe Focus a une molette blanche pour **régler la dioptrie de -4 à +4,** ce qui vous permet d'ajuster chaque œil indépendamment. Vous pouvez également utiliser la molette noire pour verrouiller le réglage et garantir une stabilité optimale.

Vidéos et produits Basse Vision

01 69 19 14 60 - info@visiole.fr

