


Lunettes Loupe MAX TV



DES LUNETTES LOUPE ADAPTÉES POUR REGARDER LA TÉLÉVISION.

Avec un grossissement de X2 ces lunettes MAX TV vous "rapprochent" de votre écran. La télévision vous semble plus grosse, plus proche.

- Facteur de rapprochement / grossissement X2,1
- Réglage indépendant de la dioptrie pour chaque oeil
- Lunettes loupes légères et discrètes

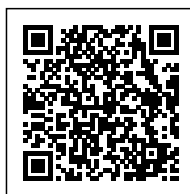

Les lunettes MAX TV permettent de regarder plus confortablement un écran positionné à environ 3 m du visage, comme un téléviseur dans un salon.

Dans quel cas utilisez ces lunettes loupe

Lorsque la distance entre vous et l'écran est entre 2 et 5 m, les lunettes MAX TV apportent un confort de lecture.

Le grossissement de 2,1 X, dit également facteur de rapprochement, facilite la compréhension des sous titres par exemple. De même les détails des images des films et émissions vous apparaissent plus nettes.

Ces lunettes loupes peuvent aussi être appréciées dans un bureau, en salle de réunion pour regarder un collègue ou l'écran.



Vidéos et produits Basse Vision

01 69 19 14 60 - info@visiole.fr

Lunettes Loupe MAX TV

Le principe de ces lunettes loupes Max TV

Les Max TV s'utilisent à la place des lunettes de vues habituelles. Chaque verre possède une molette d'ajustage située au bout de la branche. La molette permet un réglage de la dioptrie du verre, indépendamment pour chaque oeil. La **correction possible de chaque oeil est de -2,5 à +2,5 Dioptrie** .

Ces [lunettes loupe](#) max tv sont généralement bien supportées par les utilisateurs, après une petite période d'adaptation de quelques heures.

Les lunettes loupe s'utilisent à la place des lunettes de vue, pour des personnes malvoyantes atteintes de DMLA ou d'autres [maladies de la vue](#) nécessitant un grossissement faible.

L'écran est plus proche, plus gros

Les lunettes loupe MAX TV s'utilisent à la place des lunettes de vue, pour des personnes malvoyantes atteintes de DMLA ou de basse vision.



Le facteur de grossissement / rapprochement d'environ 2,1X a deux effets liés. L'écran semble alors 2 fois plus grand et 2 fois plus proche. Regarder la télévision depuis votre fauteuil devient de nouveau possible sans forcer sur ses yeux.

[Les migraines ophtalmologiques](#) disparaissent alors souvent.

Note : dans le cas de corrections multiples ou spécifiques, le port des lunettes loupe peut ne pas apporter le bénéfice escompté.

D'autres [lunettes loupes](#) sont également proposées :

- Pour voir de près, choisissez les [lunettes loupes Focus](#) (env. de 20 cm à 50 cm)
- Pour aller au spectacle, cinéma ou dans la rue, choisissez les [lunettes loupe spectacle](#) (distance supérieure à 4m)

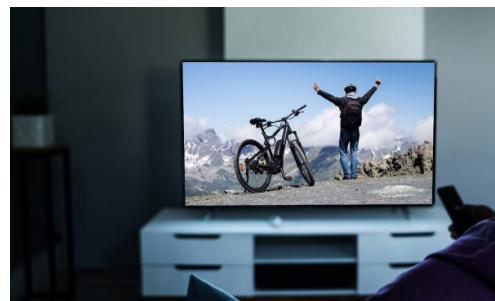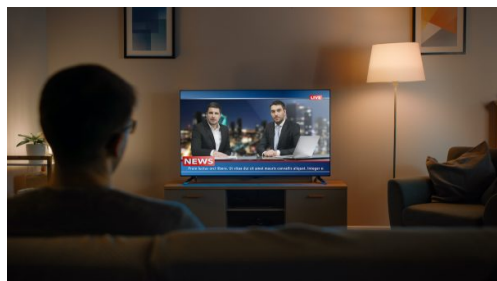

- Grossissement 2,1 x
- Distance d'utilisation entre 2 et 5 m



[Vidéos et produits Basse Vision](#)

01 69 19 14 60 - info@visiole.fr

Lunettes Loupe MAX TV

- Distance inter-pupillaire supportée de 60 à 68 mm
- Champ de vision de 9°
- Ajustage des dioptries $\pm 2,5$ par un réglage indépendant droite et gauche,
- La correction des cylindres n'est pas possible.
- Poids : 49 g



Vidéos et produits Basse Vision

01 69 19 14 60 - info@visiole.fr